

Worktops

Bordplader



Worktops, Fronts Colors and Profiles / Bordplader, fronter Farver og profiler

Worktop colors Bordplade farver

Laminated worktops
Laminatbordplader

Compact laminate
Kompakt laminat

Stainless steel
Rustfrit stål

Epoxy Resin
Epoxy

Ceramic
Keramisk

Polypropylene
Polypropylen

White / Hvid

Light grey / Lysegrå

Black / Sort

Brushed steel
Børstet stål

Beige / Beige



Fronts / Fronter

Material options / Materiale muligheder

- Laminate / Laminat
- Compact laminate / Kompakt laminat

Front colors / Front farver



Blanc Polaire



Glacier



Thistle



Oceano



Ultra Marine



Capri



Vibrant Green



Pale Olive



Lime



Wasbi



Chrome Yellow



Spectrum Yellow



Sun



Blaze Red

Plinth / Sokler

- Two standard colors.
- Som standard kan to farver vælges

Plinth colors / Sockelfarver



White



Terril


Worktop profiles / Bordpladeprofiler

Front edge / Forkanter

Rear edge / Bagkanter




Quarter rounded edges
Postform

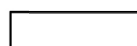

Compact laminate with Alu upturned edge
Kompakt laminat med alu opkant



Trespa + laminate with Alu upturned edge
Trespa + kompakt laminat med alu opkant

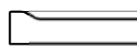

Stainless steel, with marine edge
Rustfrit stål med vulst



Epoxy Resin with marine edge
Epoxy Resin med vulst



Polypropylen with marine edge
Polypropylen med vulst







Ceramic with marine edge
Keramisk med vulst



Standard Color

A fee may be added for other colors
Standardfarve
Der tilføjes et gebyr for andre farver

Worktop materials Bordpladematerialer	Ceramic Keramisk	Epoxy resin Epoxy resin, massiv	Polypropylene(PP) Polypropylen(PP)	Stainless steel(316) Rustfrit stål (316)	Compact laminate Kompakt laminat	Laminate Laminat
Acid, base Syre, base	○	○	○	●	○	○
Organic solvents Organiske opløsningsmidler	○	○	○	○	○	○
Discoloration Misfarvning	○	○	○	○	○	○
Heat resistance Varmepåvirkning	○	●	○	●	○	○
Absorption Absorption	○	○	●	○	○	○
Compression Indtrykning	○	○	○	●	●	○
Impact effect Slagpåvirkning	●	○	○	○	●	○
Surface uniformity Overflades jævnhed	○	○	○	○	○	○
Excellent / Fremragende	○					
Good / God	●					
Acceptable / Acceptabel	○					

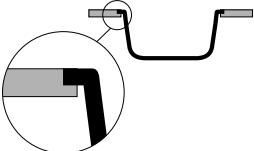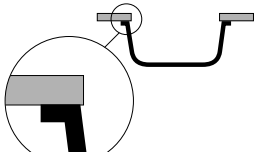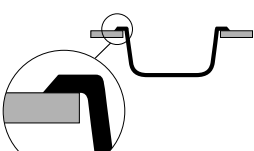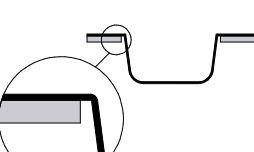Sink installation Indbygning af vask	Ceramic Keramisk	Epoxy resin Epoxy resin, massiv	Polypropylene(PP) Polypropylen(PP)	Stainless steel(316) Rustfrit stål (316)	Compact laminate Kompakt laminat	Laminate Laminat
 Drop-in sink / Drop-in vask	○	○			○	
 Undermount sink / Underlimet vask	○	○			○	
 Drop-on sink / Drop-on vask	○	○	○		○	○
 Welded in sink / Isvejst vask			○	○		

Epoxy worktop and sink specification

Epoxy is supplied with or without a marine edge. The worktop thickness is 19 mm without a marine edge and 25 mm with a marine edge. Sink and dripping cups can be integrated by inserting or under-gluing. Epoxy resin is molded monolithically, moreover, epoxy is chemically resistant and non-flammable, perfect for strict laboratory, teaching classroom and research environments. Do NOT grind on the surface of the plate with sandpaper, as the flatness treatment will be sanded.

Drop-in sinks are top-mounted into a recessed cutout, eliminating the need for a support system underneath the sink. This simplified method of installation seals the sink cutout and eliminates work surface overhang above the inner walls of a standard undermount sink basin, which can gather residual chemicals and bacteria. All DropIn sink surfaces are clearly visible and radiused for easy cleaning.

Epoxy worktop 25 mm with marine edges. Sinks and drip cups can be integrated by dropin. Epoxy resin molded monolithic epoxy is chemically resistant and non-flammable, perfect for harsh laboratory, classroom, and research environments.

All components are electrostatic powder-coated to a minimum thickness of 80µm in accordance with ISO Standard No. 2802 and are resistant to all chemicals normally used in a Laboratory.

During the service review, the worktop is inspected for damage and cracks, as well as checked for whether the sealant between the worktop is intact. Any replacement of the sealant is done by cleaning and sealing with new bathroom silicone.

Epoxy bordplade og vask specifikation

Epoxy leveres med eller uden vulst. Bordpladetykkelsen er 19 mm uden vulst og 25 mm med vulst. Vaske og drypkopper kan integreres ved ilægning eller underlimning. Epoxy resin er støbt monolitisk epoxy og er kemisk resistent og ikke antændelig, perfekt til barske laboratorie-, undervisnings- og forskningsmiljøer. Der må IKKE slibes på pladens overflade med sandpapir, da overfladebehandlingen vil kunne slibes af.

Drop-in vask monteres i en forsænket udskæring, hvilket eliminerer behovet for et støttesystem under vasken. Denne forenklede installationsmetode forsegler vaskeudskæringen og forsegler kanten på udskæringen. I modsætning til undermontering er der intet overhæng, som kan opsamle kemikalier og bakterier. Alle overflader med drop-in-vask er tydeligt synlige og afrundende for nem rengøring.

Epoxy bordplade 25 mm med marine kanter. Vask og drypkop kan integreres ved dropin. Epoxyharpiksstøbt monolitisk epoxy er kemisk resistent og ikke antændelig, perfekt til barske laboratorie-, klasselokale- og forskningsmiljøer.

Alle komponenter er elektrostatisk pulverlakeret til en minimumstykkelse på 80µm i henhold til ISO-standard nr. 2802 og er resistente over for alle kemikalier, der normalt bruges i et laboratorium.

Ved servicegennemgangen efterses bordpladen for skader og revner, samt kontrolleres for om fugeforseglingen mellem bordpladen er intakt. Eventuel udskiftning af fuge sker ved afrensning og fugning med ny vådrumssilikone.

Laminate worktops specification

Laminate worktop Comes with post-formed edges or ABS edges. This is accessed with high durable resistance and protection against fluid penetrating the plate. The worktop thickness is 28 mm.

High-pressure laminates (HPL) according to the European standard EN 438 and ISO4586.

Laminates are made up of layers of cellulose fiber material (ordinary paper) impregnated with Thermo curing resins and glued together in a high-pressure process. This process, which is defined as a simultaneous exposure to heat ($\geq 120^\circ\text{C}$) and a high, specific pressure ($\geq 5\text{ MPa}$), ensures that the Thermo hardening resins become liquid and subsequently harden into a homogeneous non-porous material ($\geq 1.35\text{ g/cm}^3$) with the desired surface finishing.

Density: $\geq 1.35\text{ g/cm}^3$

Melting point: HPL does not melt

Caloric value: 18-20 MJ/kg

Heavy metals: HPL contains no toxic compounds of antimony, heavy metals, barium, cadmium, chromium III, chromium VI, lead, mercury, selenium.

Incompatible materials: acidic and alkaline solutions can tarnish the surface.

Ignition temperature: approx. 400°C

Moisture is the worst adversary of wooden furniture; therefore, all spilled liquids should be dried up immediately. Water should only be used in small doses preferably only in the form of a wet cloth and should be immediately dried with a dry cloth.

Always be aware that no hanging drops are left on the under edge of the table-top. During the service review, the worktop is inspected for damage and cracks, as well as checked for whether the sealant between the worktop is intact. Possible replacement of the sealant is done by cleaning and sealing with new bathroom silicone.

Laminat bordplade specifikation

Laminat bordplader leveres med postformedede kanter eller ABS kanter. Derved opnås stor slidstyrke og beskyttelse mod væskeindtrængning i pladen. Bordpladetykkelsen er 28 mm.

Højtrykslaminater (HPL) i henhold til den europæiske standard EN 438 og ISO 4586.

Laminater består af lag af cellulosefibermateriale (normalt papir) imprægneret med termohærdende harpikser og limet sammen i en højtryksproces. Denne proces, der er defineret som en samtidig eksponering for varme ($\geq 120^\circ\text{C}$) og et højt, specifikt tryk ($\geq 5\text{ MPa}$), sørger for, at de termohærdende harpikser bliver flydende og efterfølgende hærdet til et homogent, ikke-porøst materiale ($\geq 1,35\text{ g/cm}^3$) med den ønskede overflade finish.

Massefylde: $\geq 1,35\text{ g/cm}^3$

Smeltepunkt: HPL smelter ikke

Brændværdi: 18-20 MJ/kg

Tungmetaller: HPL indeholder ingen giftige forbindelser af antimon, tungmetaller, barium, kadmium, krom III, krom VI, bly, kviksølv eller selen.

Uforenelige materialer: Sure og basiske opløsninger kan plette overfladen

Antændelsestemperatur: Ca. 400°C

Fugt er træmøblers værste fjende, derfor bør alle spildte væsker tørres op straks. Vand må kun anvendes i små doser helst kun i form af en fugtig klud og der bør straks tørres efter med en tør klud.

Vær altid opmærksom på at der ikke efterlades hængende dråber på underkant af bordpladen. Ved servicegennemgangen efterses bordpladen for skader og revner, samt kontrolleres for om fugeforseglingen mellem bordpladen er intakt. Eventuel udskiftning af fuge sker ved afrensning og fugning med ny vådrumssilikone.

Ceramic worktops and sinks specification

Ceramic worktop performed substantially with glazing. The plates are made of technical ceramics (chemical-technical stone) combining the highest safety factors and are resistant to almost all acids, alkaline and solvents usually found in a laboratory, are scratch and impact-resistant, non-combustible, and completely recyclable. It is easy to clean the surface and impressive with its flawless appearance even after many years of intensive use. The worktop comes with or without a marine edge.

The worktop thickness is 28 mm without a marine edge and 32mm with a marine edge. Sink and drip cups can be integrated by under mounting.

Through the service, the worktop is inspected for corrosion damage and checked for whether the sealant between the worktop is intact. Any replacement of the sealant is done by cleaning and sealing with new bathroom silicone. If damage occurs on the surface, it should be closed with transparent paint.

Keramiske bordplader og vaske specifikation

Bordplade udført i massiv keramik med glasering. Pladerne er lavet af teknisk keramik (kemisk-teknisk stentøj) der kombinerer de højeste sikkerhedsfaktorer og er modstandsdygtige over for stort set alle syrer, lud og opløsningsmidler, som almindeligvis findes i et laboratorium. De er ridse- og slagfaste, ikke-brændbare og helt genanvendelige. De er nemme at rengøre, og overfladen imponerer med sit fejlfri udseende selv efter mange års intensiv brug. Keramiske bordplader leveres med eller uden vulst.

Bordpladetykkelsen er 28 mm uden vulst og 32 mm med vulst. Vaske og drypkopper kan integreres ved underlimning.

Ved servicegennemgangen efterses bordpladen for skader samt kontrolleres for om fugeforseglinger er intakte. Eventuel udskiftning af fuge sker ved afrensning og fugning med ny vådrumssilikon. Skulle der forkomme og skade ved brud af overfyldt, lukker denne med en klar lak.

Stainless steel worktops and sinks specification

Acid-proof stainless steel worktop is made of 1.25 mm steel is glued to a water-resistant plate. The worktop is with or without marine edges. The worktop thickness is 23 mm without marine edges and 28 mm with marine edges. Sinks and drip cups can be integrated by welding.

Acid-resistant steel consists of 12% chromium and 8% nickel and 2-3% molybdenum, which makes the steel quality more corrosion-resistant, especially under acid and oxygen-poor conditions, compared to normal AISI 304 steel. Acid-resistant steel is known as 18/12 or AISI 316 or SIS 2347. AISI 316 with an addition of extra 2-3% molybdenum and nickel enhances corrosion resistance and can therefore be used in more aggressive atmospheric environments. 316 steel requires little maintenance and can withstand all cleaning agents, including acidic (but must not be mixed with chlorine-containing products) provided that it is rinsed with copious amounts of clean water. There is no guarantee that stainless steel will not corrode (rusting) as the steel quality is only one of several factors that influence the corrosion resistance - including among other things the environment.

The primary factors that can contribute to the development of rust are:

- ♦ Calcium. Lime deposits can weaken the steel alloy, always dry board and wash with a dry cloth.
- ♦ Iron-containing materials (fly rust) left on wet surfaces, typically from tools used for cleaning. For example, scouring pads.
- ♦ Salt and dry residues of evaporated liquids.
- ♦ Cleaning agents containing chlorine or ammonia that is not completely cleaned off.

At the service inspection, check the worktop for corrosion damage and check whether the joint seal between the worktop is intact. Possible replacement of joints is done by cleaning and grouting with new wet room silicone. Corrosion damage is removed by grinding with a sponge and subsequent treatment with Sidol metal gloss or the like.

Always sand in the grinding direction.

Syrefast rustfrit stål bordplade og vask, specifikation

Syrefast rustfrit stål bordplade udført i 1,25 mm stål der er limet på en vandfast plade. Bordpladen er med eller uden vulst. Bordpladetykkelsen er 23 mm uden vulst og 28 mm med vulst. Vaske og drypkopper kan integreres ved isvejsning.

Syrefast stål indeholder 12% krom, 8% nikkel og 2-3 % molybdæn, hvilket gør stål kvaliteten mere korrosionsbestandig, især under sure og iltfattige betingelser, i forhold til alm. AISI 304 stål. Syrefast stål går under betegnelsen 18/12 eller AISI 316 eller SIS 2347. AISI 316 med en tilføjelse på ekstra 2-3% molybdæn og nikkel forstærker korrosionsbestandigheden og kan derfor anvendes i mere aggressive atmosfæriske miljøer. 316 stål kræver kun ringe vedligeholdelse og kan modstå alle rengøringsmidler, inklusive syreholdige produkter forudsat, at der efterskylles med rigelige mængder rent vand.

Der ingen garanti for at rustfri stål ikke korroderer (rufter) idet stål kvaliteten kun er en af flere faktorer, der har indflydelse på korrosionsbestandigheden, - herunder blandt andet miljøet.

De primære faktorer, der kan medvirke til rustfremkaldelse er:

- ♦ Kalk. Kalkaflejringer kan svække stål legeringen, - tør altid borde og vaske efter med en tør klud.
- ♦ Jernholdige materialer (flyverrust) der efterlades på våde overflader, - typisk fra redskaber der anvendes til rengøring. Eksempelvis skuresvampe.
- ♦ Salte og tørre rester af fordampede væsker
- ♦ Rengøringsmidler der indeholder klorid klorid eller ammoniak, der ikke bliver rensset fuldstændigt af.

Ved servicegennemgangen efterses bordpladen for korrosionsskader samt kontrolleres for om fugeforseglinger mellem bordplader er intakte. Eventuel udskiftning af fuge sker ved afrensning og fugning med ny vådrumssilikon. Korrosionsskader fjernes ved slibning med 3M svamp og efterfølgende behandling med Sidol metalglans eller lignende. Puds altid i sliberetningen.

Compact laminate worktop specification

Compact laminate meets the requirements of EN 438:2005, which requires resistance to stain from more than 40 substances, which can be expected to meet in daily life. These include, for example, tea, coffee, milk, citric acid, acetone, alcohol, fruit juice, dish detergents, bleaching agents, and coloring agents, but not chemicals that are most likely to occur in laboratories.

Labmodul Laminat has been independently tested according to ENVI 186 and has been approved for purposes that involve contact with food.

Compact laminate surfaces should be protected from damage caused by heat, such as Heat from Bunsen burners. The Bunsen burner should be placed on a tripod to protect the surface.

During the service review, the worktop is inspected for damage, cracks, and checked if the sealant between the worktop is intact. Any replacement of the sealant is done by cleaning and gluing with new wet-cleaning silicone.

Kompakt laminat bordplade specifikation

Kompakt laminat opfylder med lethed kravene i EN 438:2005, som kræver bestandighed over for pletning fra mere end 40 stoffer, som man kan forvente at møde i dagligdagen. Disse omfatter bl.a. te, kaffe, mælk, citronsyre, acetone, alkohol, frugtsaft, opvaskemidler, blegemidler og farvemidler, men ikke kemikalier der højst sandsynligt vil forekomme i laboratorier.

Labmoduls laminat er blevet uafhængigt testet iht. ENVI186 og er blevet godkendt til formål, der involverer kontakt med fødevarer.

Kompaktlaminatoverflader bør beskyttes mod skader forårsaget af varme, som f.eks. varme fra bunsenbrændere. Bunsenbrænderen bør placeres på en trefod for at beskytte overfladen.

Ved servicegennemgangen efterses bordpladen for skader og revner, samt kontrolleres for om fugeforseglingen mellem bordpladerne er intakte. Eventuel udskiftning af fuge sker ved afrensning og fugning med ny vådrumssilikone.

Polypropylene worktops and sinks specification

Chemical resistant worktop PP (polypropylene)-coated 22 mm chipboard with marine edges on four sides. All joints are welded together so that there are no open joints. It can be made with one or more sinks or completely without a sink depending on the type of task.

Polypropylene has superior resistance to a wide range of acids, alkaline, reagents, and solvents, and UV light making it ideal for use in modern required laboratories.

Dripping cups and sinks are made from the molded PP (polypropylene), with round corners and fall to the drain.

Mounted with grate and plug and bottom valve with 1 ½ pipe thread suitable for connection piece plumbing No. 18.4251.341.

Through the service, the worktop is inspected for damage and cracks, as well as checked for whether the sealant between the worktop and the sink is intact. Any replacement of the sealant is done by cleaning and gluing with new bathroom silicone.

Polypropylen bordplade og vask specifikation

Kemikalieresistente bordplader PP (polypropylene)-belagt 22 mm spånplade med vulst på fire sider. Alle samlinger sammensvejses, således at der ikke er åbne samlinger. Fremstilles med en eller flere vaske eller helt uden vaske efter opgave.

Polypropylen har overlegen modstandsdygtighed over for en lang række syrer, alkaliske, reagenser, opløsningsmidler og også UV-lys gør den ideel til anvendelse i nutidens krævende laboratorier.


Drypkopper og vaske er fremstillet af formpresset PP (polypropylene), med runde hjørner og fald mod afløb.

Monteret med rist og prop samt bundventil med 1 ½" rørgvind passende for tilslutningsstykke VVS nr. 18.4251.341.


Ved servicegennemgangen efterses bordpladen for skader og revner, samt kontrolleres for om fugeforseglingen mellem bordpladen og vasken er intakt. Eventuel udskiftning af fuge sker ved afrensning og fugning med ny vådrumssilikone.

Principle for placing worktop sinks and fixtures / Princip for placering af bordplader, vaske og armaturer




Fixtures should always be installed a minimum of 150 mm apart.
 Armaturer skal altid installeres med mindst 150 mm mellemrum.

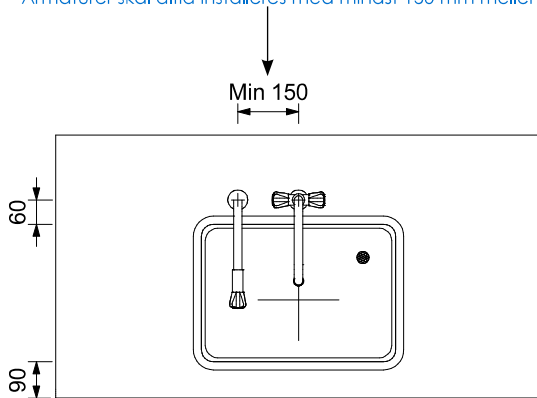


Sinks are placed Min 90 mm from the worktop front edge.
 Vask placeres min. 90 mm fra bordpladens forkant.

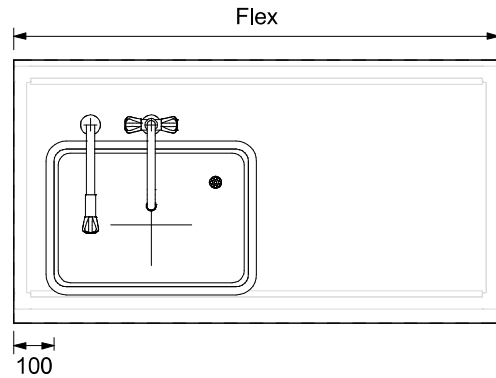

Sinks are placed Min 100 mm from the worktop side edge.
 Vask placeres mindst 100 mm fra bordpladens sidekant.

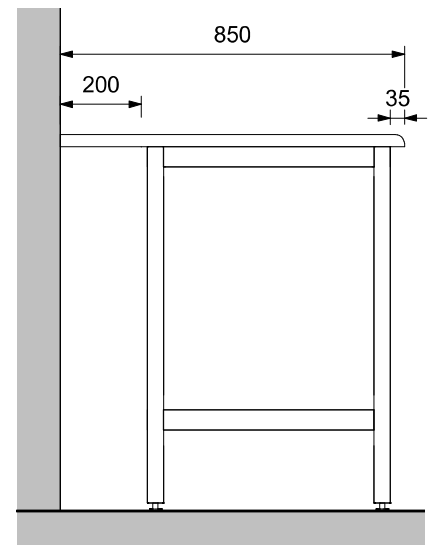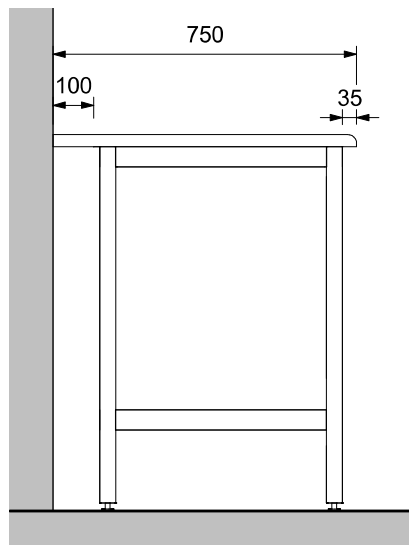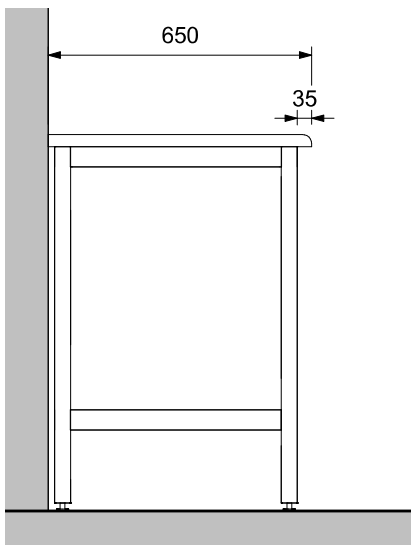

Height-adjustable worktop, safety tolerances / Højdejusterbar bordplade, sikkerhedstolerancer

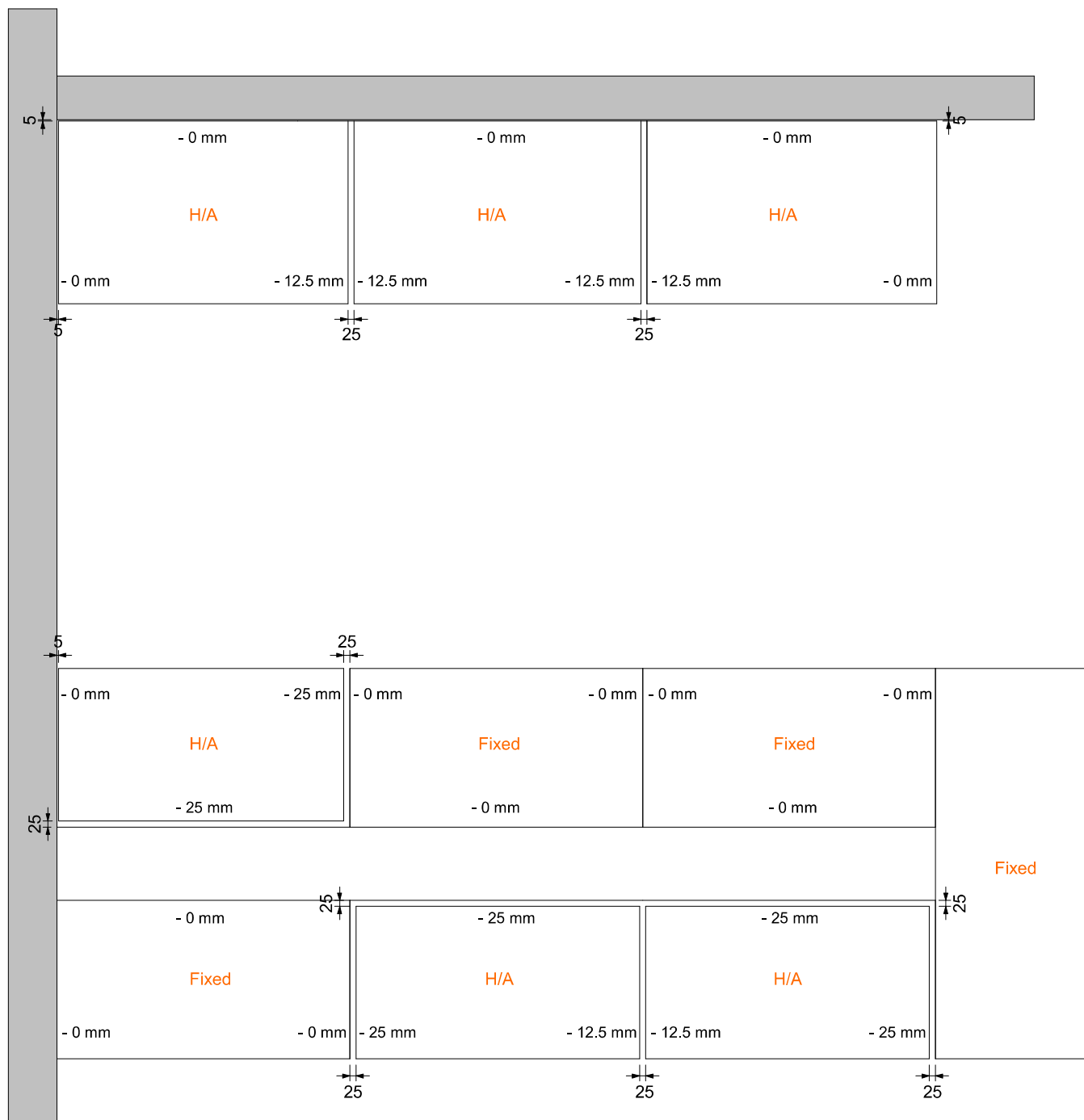**NOTE:**

- For safety reasons, there should be at least 25mm between 2 height-adjustable worktops or between a height-adjustable and non-height-adjustable worktops.
- Af sikkerhedsmæssige grunde skal der være mindst 25 mm mellem 2 højdejusterbare bordplader eller mellem en højdejusterbar og ikke-højdejusterbar bordplade.



H/A = Height-adjustable worktop / Højdejusterbar bordplade
 Fixed = Non-height-adjustable worktop / Ikke-højdejusterbar bordplade



Sinks and drip cups

Vaske og drypkopper



Sinks and dripping cups overview

Vaske- og drypkop oversigt

Epoxy sink
Epoxy vask



300	200	200	VAEP-300-200-200-90001	White-Grey/Hvid-Grå
356	254	152	VAEP-356-254-152-90001	White-Grey/Hvid-Grå
400	400	300	VAEP-400-400-300-90001	White-Grey/Hvid-Grå
406	305	203	VAEP-406-305-203-90001	White-Grey/Hvid-Grå
★ 450	365	200	VAEP-450-365-200-90001	White-Grey/Hvid-Grå

Epoxy dripping cup
Epoxy drypkop



★ 150	70	108	DREP-150-70-108-90001	White-Grey/Hvid-Grå
229	76	134	DREP-229-76-134-90001	White-Grey/Hvid-Grå
250	125	150	DREP-250-125-150-90001	White-Grey/Hvid-Grå

Ceramic sink
Keramisk vask



★ 400	400	250	VAKE-400-400-250-90051	White-Grey/Hvid-Grå
500	400	250	VAKE-500-400-250-90051	White-Grey/Hvid-Grå
600	400	250	VAKE-600-400-250-90051	White-Grey/Hvid-Grå

Ceramic dripping cup
Keramisk drypkop



★ 250	95	112	DRKE-250-95-112-90051	White-Grey/Hvid-Grå
Ø105		112	DRKE-Ø105-112-90051	White-Grey/Hvid-Grå

Stainless steel sink
Rustfrit stål vask



340	300	145	VARF-340-300-145-90151	Stainless steel/Rustfrit
400	340	145	VARF-400-340-145-90151	Stainless steel/Rustfrit
★ 480	340	180	VARF-480-340-180-90151	Stainless steel/Rustfrit
500	400	160	VARF-500-400-200-90151	Stainless steel/Rustfrit
600	400	200	VARF-600-400-200-90151	Stainless steel/Rustfrit

Stainless steel dripping cup
Rustfrit stål drypkop



Ø100			DRRF-Ø100-90153	Stainless steel/Rustfrit
Ø150			DRRF-Ø150-90153	Stainless steel/Rustfrit
Ø130			DRRF-Ø130-90153	Stainless steel/Rustfrit
★ 250	150	100	DRRF-250-150-100-90153	Stainless steel/Rustfrit



★ Standard

Sinks and dripping cups overview

Vaske- og drypkop oversigt

Width Bredde (mm)	Depth Dybde (mm)	Height Højde (mm)	Item nr. Varenr.	Color Farve
-------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	----------------

Polypropylene sink - (PP)
Polypropylen vask - (PP)



320	320	200	VAPP-320-320-200-90101	White-Grey/Hvid-Grå
400	300	250	VAPP-400-300-250-90101	White-Grey/Hvid-Grå
400	400	250	VAPP-400-400-250-90101	White-Grey/Hvid-Grå
★ 500	400	250	VAPP-500-400-250-90101	White-Grey/Hvid-Grå
600	450	250	VAPP-600-450-250-90101	White-Grey/Hvid-Grå

Polypropylene dripping cup - (PP)
Polypropylen drypkup

Ø170	115	DRPP-Ø170-115-90101	White-Grey/Hvid-Grå
★ 265	117	DRPP-265-117-185-90101	White-Grey/Hvid-Grå



Drainage components / Afløbskomponenter



Drain plug 97B0070P
Bundprop 97B0070P



Overflow pipe 158mm 97B0158
Overløbsrør 158mm 97B0158



Water trap 97B0080
Vandlås 97B0080

Water protection mat

Vandbeskyttelsesmåtte



Water protection mat for sink cabinets overview

A smart mat that can be placed in the bottom of a cupboard where there is a risk of water coming in, and which protects the cupboard underneath.

The mat prevents the water from reaching the cabinet carcass and seeps into the joints where it begins to dissolve chipboard.

- White plastic
- Plates with hemispherical recesses
- Water volume per M2: 6 liters
- Length: 2000 mm
- Width: 580 mm

The product is cut to fit in the bottom of your cupboard.

Vandbeskyttelsesmåtte til vaskeskab oversigt

Smart måtte der kan lægges i bunden af et skab, hvor der er risiko for at vand kommer ind, og som beskytter skabet.

Måtten forhindrer, at vandet når ud til korpus og siver ned i samlingerne, hvor det begynder at opløse spånpladen.

- Hvidt kunststof
- Plader med halvkugleformede fordybninger
- Vandmængde pr. m2: 6 liter
- Længde: 2000 mm
- Bredde: 580 mm

Produktet tilskæres så det passer i bunden af dit skab.


Water protection mat for sink cabinets Vandbeskyttelsesmåtte til vaskeskabe	Width Bredde (mm)	Depth Dybde (mm)	Height Højde (mm)	Item nr. Varenr.	Color Farve
--	-------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	----------------

Water protection mat
Vandbeskyttelsesmåtte

2000


580

White/Hvid

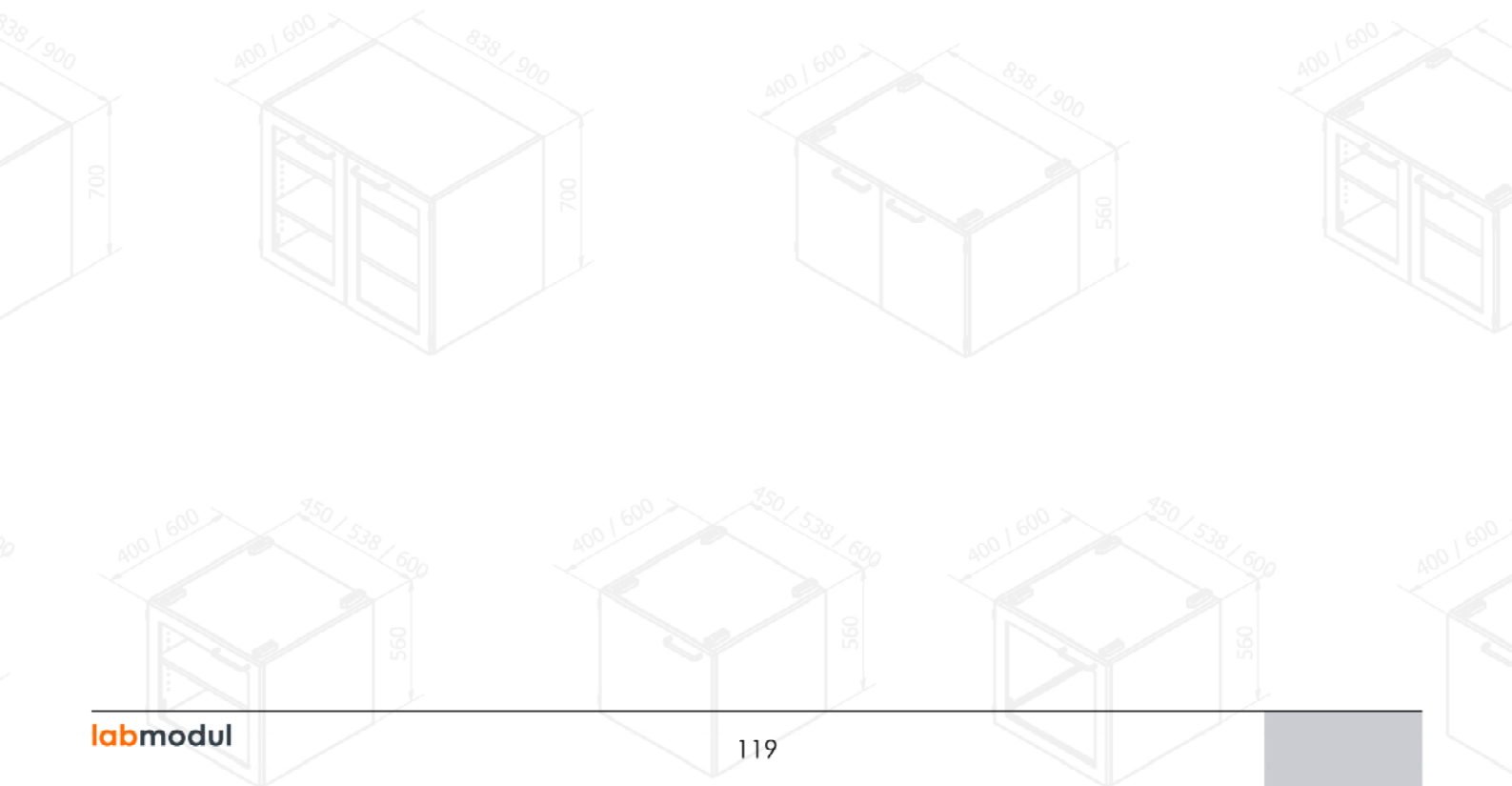

Water and Gass Taps

Vand- og gasarmaturer

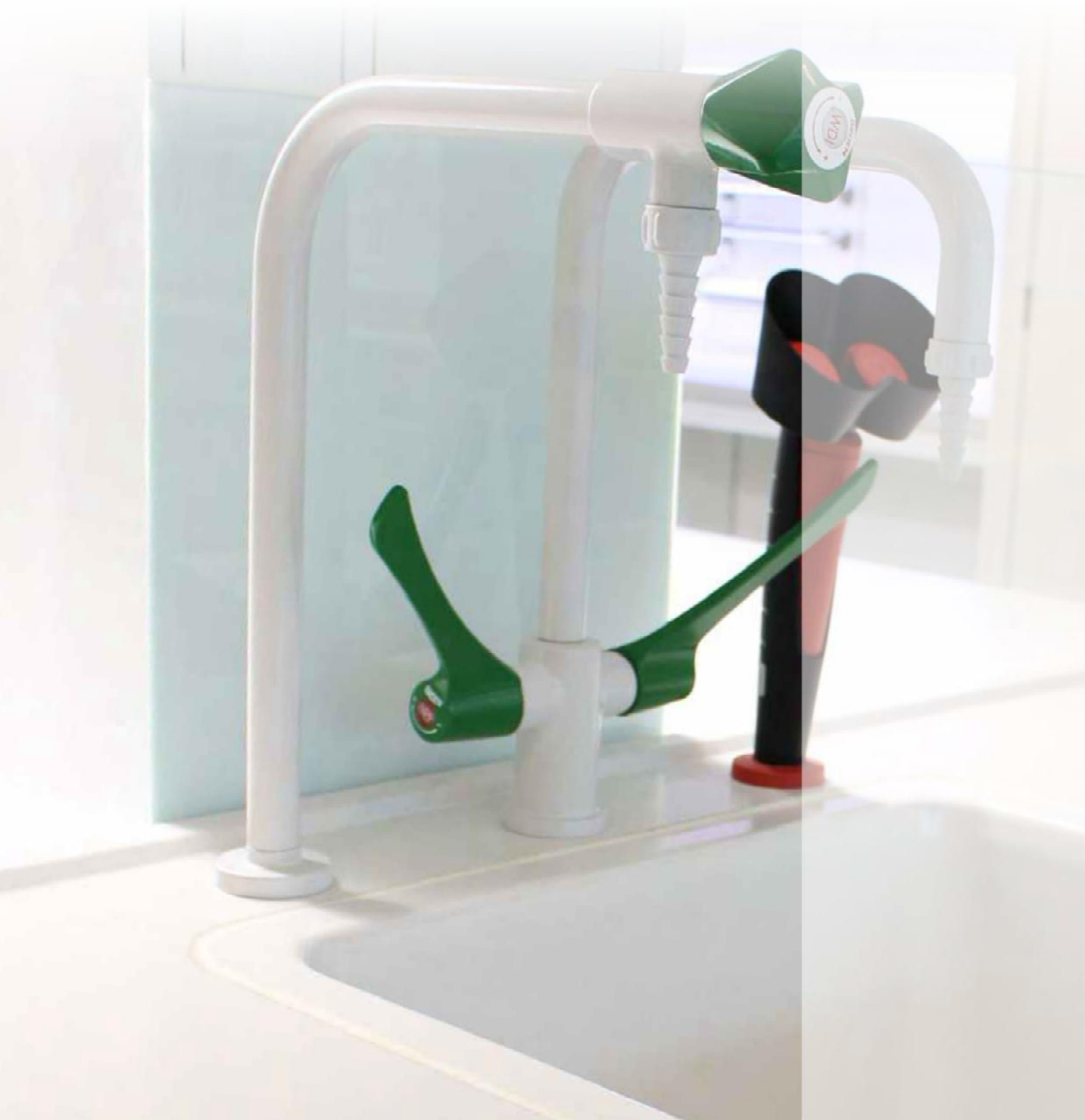

Taps and fittings Armaturer

Media
MediaDescription
BeskrivelseDepth
Dybde
(mm)Height
Højde
(mm)Item nr.
Varenr.

Without recirculation / Uden recirkulation


Bench mounted fitting
Standhane bordmonteret

Recirculation

	Distilled water/Destilleret vand	150	300	ZBR-2533 003 1003
	Deionized water/Afioniseret vand	150	300	ZBR-2533 003 1036
	Distilled water/Destilleret vand	200	300	ZBR-2533 004 1003
	Deionized water/Afioniseret vand	200	300	ZBR-2533 004 1036

With recirculation / Med recirkulation

	Distilled water/Destilleret vand	150	300	ZBR-2533 043 1003
	Deionized water/Afioniseret vand	150	300	ZBR-2533 043 1036
	Distilled water/Destilleret vand	200	300	ZBR-2533 031 1003
	Deionized water/Afioniseret vand	200	300	ZBR-2533 031 1036

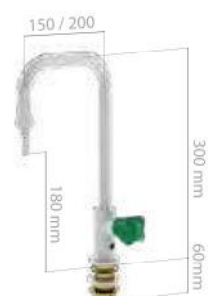Bench mounted fitting - rotatable
Standhane - drejbar

	Cold water/koldt vand	150	300	ZBR-25340748001-52B
	Hot water/varmt vand	150	300	ZBR-25340748002-52B
	Cold water/koldt vand	200	300	ZBR-25340211001-14
	Hot water/varmt vand	200	300	ZBR-25340211002-14

With metal handle/Med metal greb

Two-handle mixer - rotatable
Blandingsbatteri - drejbar

With metal handles

+	Hot and cold water Varmt og koldt vand	150	300	ZBR-25360011039-52B
+	Hot and cold water Varmt og koldt vand	200	300	ZBR-25360021039-52B


With wrist action levers / Med albuekølle

+	Hot and cold water Varmt og koldt vand	150	300	ZBR-25360281039-52B
+	Hot and cold water Varmt og koldt vand	200	300	ZBR-25360141039-52B


With wrist action levers



★ Standard

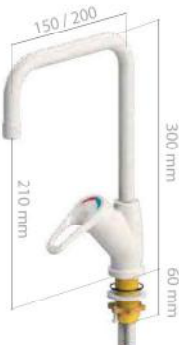Taps and fittings Armaturer	Media Media	Description Beskrivelse	Depth Dybde (mm)	Height Højde (mm)	Item nr. Varenr.
One-handle mixer - rotatable Etgrebs blandingsbatteri - drejbar		Hot and cold water Varmt og koldt vand	150	300	ZBR-2535 038 1035-52B
		Hot and cold water Varmt og koldt vand	200	300	ZBR-2535 039 1035-52B

Eye Shower with Two 45° Heads Øjenskyller, dobbelt, 45° hoveder		Clean water / Rent vand	245	ZBR-27100091005011
				

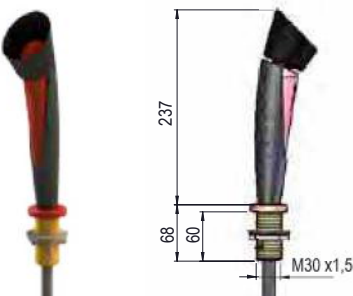Eye Shower with one 45° Heads Øjenskyller, enkelt 45° hoved		Clean water / Rent vand	237	ZBR-27100031005011
				

Hand-held eye showers Håndøjenbruser		Clean water / Rent vand	251	ZBR-17702000C
				

 Standard

Taps for burning/non-burning gas Armaturer til brændende og ikke-brændende gas	Media Media	Description Beskrivelse	Depth Dybde (mm)	Height Højde (mm)	Item nr. Varenr.
---	----------------	----------------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Bench mounted fitting - 1 valve
Armaturer bordmonteret 1 udtag



1 valve

	Natural gas / <i>Naturgas</i>	138	133	ZBR-2532 026 1010-52M
	Compress air / <i>Trykluft</i>	138	133	ZBR-2532 023 1021-52B
	Vacuum / <i>Vakuum</i>	138	133	ZBR-2532 024 1028-52B
	Nitrogen / <i>Nitrogen</i>	138	133	ZBR-2532 023 1023-52B
	Oxygen / <i>O2 ilt</i>	138	133	ZBR-2532 040 1022-52B
	Helium / <i>Helium</i>	138	133	ZBR-2532 023 1026-52B
	Argon / <i>Argon</i>	138	133	ZBR-2532 023 1025-52B

Bench mounted fitting - 2 valve
Armaturer bordmonteret 2 udtag



2-valve 90°

	Natural gas / <i>Naturgas</i>	138	133	ZBR-2532 034 1010-52M
	Compress air / <i>Trykluft</i>	138	133	ZBR-2532 031 1021-52B
	Vacuum / <i>Vakuum</i>	138	133	ZBR-2532 032 1028-52B
	Nitrogen / <i>Nitrogen</i>	138	133	ZBR-2532 031 1023-52B
	Oxygen / <i>O2 ilt</i>	138	133	ZBR-2532 042 1022-52B
	Helium / <i>Helium</i>	138	133	ZBR-2532 031 1026-52B
	Argon / <i>Argon</i>	138	133	ZBR-2532 031 1025-52B

Bench mounted fitting - 2 valve
Armaturer bordmonteret 2 udtag



2-valve 180°

	Natural gas / <i>Naturgas</i>	138	133	ZBR-2532 030 1010-52M
	Compress air / <i>Trykluft</i>	138	133	ZBR-2532 027 1021-52B
	Vacuum / <i>Vakuum</i>	138	133	ZBR-2532 028 1028-52B
	Nitrogen / <i>Nitrogen</i>	138	133	ZBR-2532 027 1023-52B
	Oxygen / <i>O2 ilt</i>	138	133	ZBR-2532 041 1022-52B
	Helium / <i>Helium</i>	138	133	ZBR-2532 027 1026-52B
	Argon / <i>Argon</i>	138	133	ZBR-2532 027 1025-52B

Bench mounted fitting - 4 valve
Armaturer bordmonteret 4 udtag



4-valve

	Natural gas / <i>Naturgas</i>	138	133	ZBR-2532 038 1010-52M
	Compress air / <i>Trykluft</i>	138	133	ZBR-2532 035 1021-52B
	Vacuum / <i>Vakuum</i>	138	133	ZBR-2532 036 1028-52B
	Nitrogen / <i>Nitrogen</i>	138	133	ZBR-2532 035 1023-52B
	Oxygen / <i>O2 ilt</i>	138	133	ZBR-2532 044 1022-52B
	Helium / <i>Helium</i>	138	133	ZBR-2532 035 1026-52B
	Argon / <i>Argon</i>	138	133	ZBR-2532 035 1025-52B

Taps for burning/non-burning gas Armaturer til brændbar og ikke-brændbar gas	Media Media	Description Beskrivelse	Depth Dybde (mm)	Height Højde (mm)	Item nr. Varenr.
Service bridge fitting - 1 valve Servicebro monteret 1 udtag  1 valve		Natural gas / <i>Naturgas</i>	127	129	ZBR-2530 041 1010-52M
		Compress air / <i>Trykluft</i>	127	129	ZBR-2530 090 1021-52B
		Vacuum / <i>Vakuum</i>	127	129	ZBR-2530 091 1028-52B
		Nitrogen / <i>Nitrogen</i>	127	129	ZBR-2530 090 1023-52B
		Oxygen / <i>O2 ilt</i>	127	129	ZBR-2530 123 1022-52B
		Helium / <i>Helium</i>	127	129	ZBR-2530 090 1026-52B
		Argon / <i>Argon</i>	127	129	ZBR-2530 090 1025-52B
Bench mounted fitting - 2 valve Armaturer bordmonteret 2 udtag  2-valve 90°		Natural gas / <i>Naturgas</i>	127	129	ZBR-2530 077 1010-52M
		Compress air / <i>Trykluft</i>	127	129	ZBR-2530 092 1021-52B
		Vacuum / <i>Vakuum</i>	127	129	ZBR-2530 093 1028-52B
		Nitrogen / <i>Nitrogen</i>	127	129	ZBR-2530 092 1023-52B
		Oxygen / <i>O2 ilt</i>	127	129	ZBR-2530 151 1022-52B
		Helium / <i>Helium</i>	127	129	ZBR-2530 092 1026-52B
		Argon / <i>Argon</i>	127	129	ZBR-2530 092 1025-52B
Bench mounted fitting - 2 valve Armaturer bordmonteret 2 udtag  2-valve 180°		Natural gas / <i>Naturgas</i>	127	129	ZBR-2530 036 1010-52M
		Compress air / <i>Trykluft</i>	127	129	ZBR-2530 037 1021-52B
		Vacuum / <i>Vakuum</i>	127	129	ZBR-2530 039 1028-52B
		Nitrogen / <i>Nitrogen</i>	127	129	ZBR-2530 037 1023-52B
		Oxygen / <i>O2 ilt</i>	127	129	ZBR-2530 055 1022-52B
		Helium / <i>Helium</i>	127	129	ZBR-2530 037 1026-52B
		Argon / <i>Argon</i>	127	129	ZBR-2530 037 1025-52B
Bench mounted fitting - 4 valve Armaturer bordmonteret 4 udtag  4-valve		Natural gas / <i>Naturgas</i>	127	129	ZBR-2530 137 1010-52M
		Compress air / <i>Trykluft</i>	127	129	ZBR-2530 094 1021-52B
		Vacuum / <i>Vakuum</i>	127	129	ZBR-2530 095 1028-52B
		Nitrogen / <i>Nitrogen</i>	127	129	ZBR-2530 094 1023-52B
		Oxygen / <i>O2 ilt</i>	127	129	ZBR-2530 152 1022-52B
		Helium / <i>Helium</i>	127	129	ZBR-2530 094 1026-52B
		Argon / <i>Argon</i>	127	129	ZBR-2530 094 1025-52B

Taps for burning/non-burning gas Armaturer til brændbar og ikke-brændbar gas	Media Media	Description Beskrivelse	Depth Dybde (mm)	Height Højde (mm)	Item nr. Varenr.
---	----------------	----------------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Wall mounted fitting - 90° valve
Vægmonteret - 90° slangstuds



90° valve

	Natural gas / <i>Naturgas</i>	135	80	ZBR-2530 323 1010-14
	Compress air / <i>Trykluft</i>	135	80	ZBR-2530 299 1021-52B
	Vacuum / <i>Vakuum</i>	135	80	ZBR-2530 300 1028-52B
	Nitrogen / <i>Nitrogen</i>	135	80	ZBR-2530 299 1023-52B
	Oxygen / <i>O2 ilt</i>	135	80	ZBR-2530 329 1022-52B
	Helium / <i>Helium</i>	135	80	ZBR-2530 299 1026-52B
	Argon / <i>Argon</i>	135	80	ZBR-2530 299 1025-52B

Wall mounted fitting - straight valve
Vægmonteret - lige slangstuds



Straight valve

	Natural gas / <i>Naturgas</i>	122	75	ZBR-2532 173 1010-14
	Compress air / <i>Trykluft</i>	122	75	ZBR-2532 164 1021-52B
	Vacuum / <i>Vakuum</i>	122	75	ZBR-2532 165 1028-52B
	Nitrogen / <i>Nitrogen</i>	122	75	ZBR-2532 164 1023-52B
	Oxygen / <i>O2 ilt</i>	122	75	ZBR-2532 167 1022-52B
	Helium / <i>Helium</i>	122	75	ZBR-2532 164 1026-52B
	Argon / <i>Argon</i>	122	75	ZBR-2532 164 1025-52B

Wall mounted fitting - 45° valve
Vægmonteret - 45° slangstuds




45° valve

	Natural gas / <i>Naturgas</i>	140		ZBR-2530 341 1010-14
	Compress air / <i>Trykluft</i>	140		ZBR-2530 353 1021-52B
	Vacuum / <i>Vakuum</i>	140		ZBR-2530 354 1028-52B
	Nitrogen / <i>Nitrogen</i>	140		ZBR-2530 353 1023-52B
	Oxygen / <i>O2 ilt</i>	140		ZBR-2530 347 1022-52B
	Helium / <i>Helium</i>	140		ZBR-2530 353 1026-52B
	Argon / <i>Argon</i>	140		ZBR-2530 353 1025-52B

Draining Rack

Afdrypningsstativ

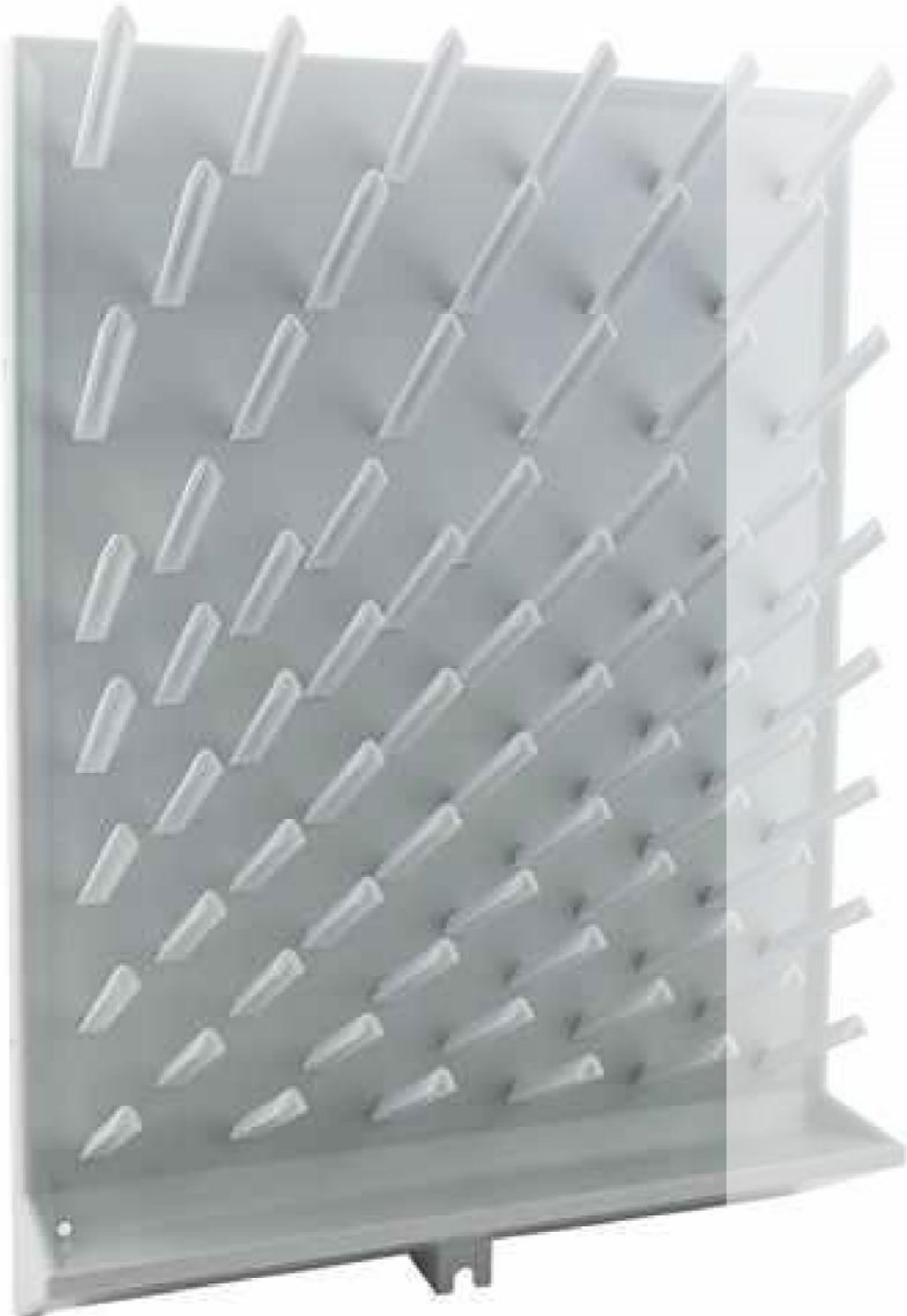

Draining Rack - General Description

High impact polystyrene drying rack, Wall mounting, with wide draining trough. Pegs can be inserted as required.

Peg holes are sealed at the rear to prevent water leakage from penetrating the wall behind.

Supplied with 72 pegs (15mm diameter, 95mm long), 11 small pegs (6mm diameter, 95mm long) drain tubing, and fittings for wall mounting.

Dimensions (W x D x H): 450 x 110 x 630 mm

Afdrypningsstativ - Generel beskrivelse

Afdrypningsstativ af polystyren til vægmontering, med bredt dræningskar. Pinde kan indsættes efter behov.

Pindhuller er forseglet bagpå for at forhindre vand i at trænge ind i væggen bagved.

Leveres med 72 pinde (15 mm diameter, 95 mm lang), 11 små pinde (6 mm diameter, 95 mm lange) afløbsslanger og fittings til vægmontering.

Mål (L x B x H): 450 x 110 x 630 mm

Draining Rack, PS Afdrypningsstativ, PS	Width Bredde (mm)	Height Højde (mm)	Item nr. Varenr.	Rods Stænger 95x15mm	Rods Stænger 95x6mm	Color Farve
--	-------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------------	----------------

Draining Rack for wall
Afdrypningsstativ til væg

450	630	ZAD-450-110-630	72	11	Grey/Grå
-----	-----	-----------------	----	----	----------



Wall mounting. Perforated with holes to take interchangeable pegs as indicated. Supplied complete with wall-mounting screws and dowels, PVC outlet channel, and drainage connection.

Vægmontering. Perforeret med huller til udskiftelige pinde som angivet. Leveres komplet med vægmonteringskruer og dyvler, PVC-udløbskanal og afløbstilslutning.

Draining Rack, PVC Afdrypningsstativ, PVC	Width Bredde (mm)	Height Højde (mm)	Item nr. Varenr.	Rods Stænger 60x6mm	Rods Stænger 100x10mm	Rods Stænger 150x12mm	Color Farve
--	-------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------

Draining Rack for wall
Afdrypningsstativ til væg

400	400	ZAD-400-400	5	26	2	White/Hvid
500	500	ZAD-500-500	10	39	4	White/Hvid
600	600	ZAD-600-600	15	56	6	White/Hvid



Glass splashback

Stænkplade



Glass splashback specification

A glass splashback is made of tempered glass and is typically used as a cover around worktops with wash station.

On free-standing worktops with wash station, 6mm glass splashback is used. While for wall worktops with wash station a 4mm glass splashback is used. The edges of the splashback are polished.

If the tempered glass breaks, it shatters into small harmless pieces. Therefore, it is safe to use in places where breaking ordinary glass will pose a danger to persons.

It can withstand temperature differences up to approx. 250 degrees.

Stænkplade specifikation

Stænkplader er udført i hærdet glas og anvendes typisk som afdækning omkring vaskeborde.

I forbindelse med fritstående vaskeborde anvendes 6 mm glas og ved vægopstillinger 4 mm. Kanter fremstår polerede.

Knuses hærdet glas granulerer det i små ufarlige stykker. Derfor kan det med fordel bruges som sikkerhedsglas på steder, hvor knusning af almindeligt glas vil medføre personfare.

Tåler temperaturforskelle op til ca. 250 grader.







Labmodule glass splashback

- Tempered safety glass
- A protective smooth glass surface.
- Resistant to moisture and a wide range of chemical products.
- Easy to clean

Labmodul stænkplader

- Hærdet sikkerhedsglas
- En beskyttende glat glasoverflade.
- Modstandsdygtig overfor fugt og en lang række kemiske produkter.
- Let at rengøre

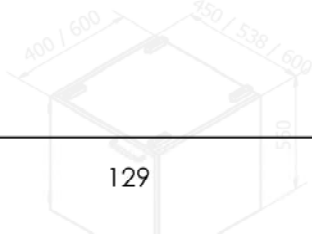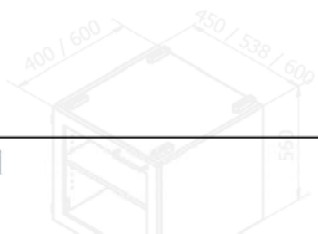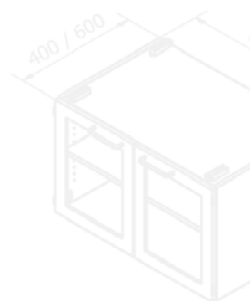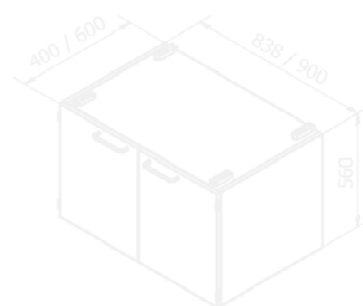


Glass splashback for wall and freestanding
Stænklade til væg og fritstående

Width Bredde (mm)	Depth Dybde (mm)	Height Højde (mm)	Item nr. Varenr.	Material Materiale
-------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------





Glass splashback freestanding
Fritstående stænklade

1600	6	330		Tempered glass / Hærdet glas
------	---	-----	--	------------------------------

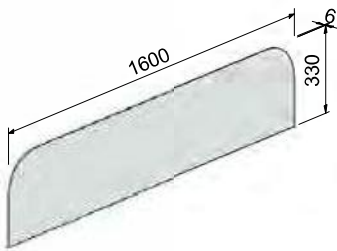

Glass splashback for the Wall
Stænklade til væg

900	4	330	Tempered glass / Hærdet glas
1200	4	330	Tempered glass / Hærdet glas
1500	4	330	Tempered glass / Hærdet glas
1800	4	330	Tempered glass / Hærdet glas

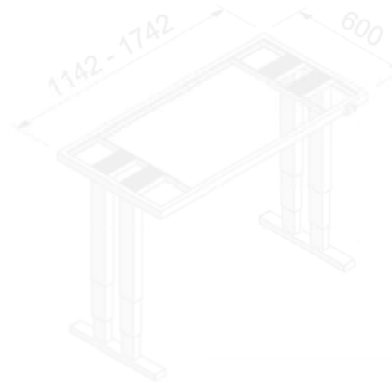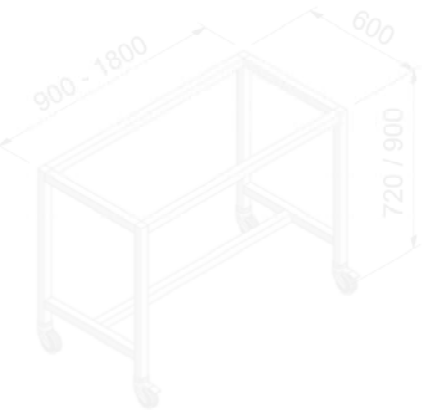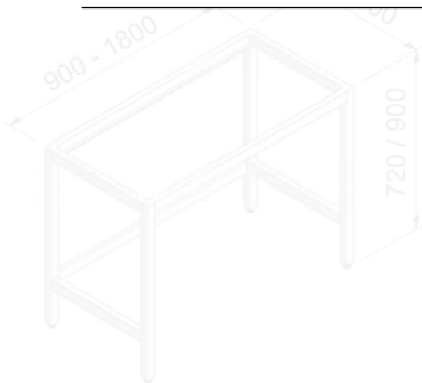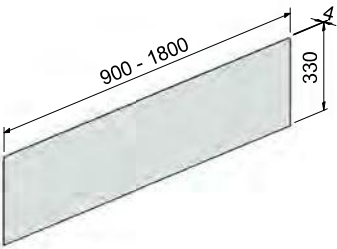

Cabinet Fronts and Handles / Skabsfronter og -greb

Fronts / Fronter

- ◆ Highpressure laminate / Højtrykslaminat
- ◆ Compact laminate / Kompaktlaminat
- ◆ Linoleum
- ◆ Corian



Glass cabinet fronts / Vitrinefronter

- ◆ Natural anodised 20 mm aluminum frame with 110° hinges / [Naturanodiseret 20 mm aluminiumsramme med 110° hængsel](#)
- ◆ White powder coated 20 mm aluminum frame with 110° hinges / [Hvid pulvertakeret 20 mm aluminiumsramme med 110° hængsel](#)
- ◆ Laminate 60 mm frame with 270° hinges / [Laminat 60 mm ramme med 270° hængsler](#)
- ◆ Laminate 60 mm frame concealed 110° hinges / [Laminat 60 mm ramme med skjulte 110° hængsler](#)



Handles / Greb

- ◆ Standard logistics aluminum handles with an inclined surface for example Dymo strips. Width 190 mm / [Standard logistikgreb i aluminium med skrå markeringsflade til eksempelvis Dymo strimler. Bredde 190 mm](#)
- ◆ Handle in brushed stainless steel. Width 160 mm / [Bøjlegreb i rustfri stål. Bredde 160 mm](#)
- ◆ Handle in matt aluminium. Width 160 mm / [Bøjlegreb i aluminium. Bredde 160 mm](#)



Cabinets Front Details

Skabsfrontdetaljer

Aluminum fronts with glass are made with an aluminum profile of 20.6 x 19mm. The glass is a 4mm tempered safety glass fitted with a thin rubber profile in the aluminum groove so that the glass is firmly /stable in the frame.

Aluminum frame hinges can be opened 110 degrees and are certified by LGA. The hinge is adjustable and can be equipped with a soft-closing function.

Laminate fronts are made 21 mm consisting of 0.8 mm high pressure laminate coated sheet on 2 sides and fitted with 3 mm ABS edge strip on all sides.

Laminate front with glass are made with a 60mm profile. The glass is a 4mm tempered safety glass

Hinges for laminate frames can be opened 270 degrees and are certified according to ANSI class 1 and EN 15570. The hinge consists of 2 parts, a "cup" that is mounted in the front and fittings that are mounted on the cabinet carcass. The hinge can easily be assembled and separated into these 2 components.

Alu fronter med glas udføres som rammelåge med aluminium profil 20,6 x 19mm. Glas er 4 mm hærdet sikkerhedsglas monteret med en tynd gummiprofil i alu-notsporet, således at glasset sidder godt/stabilt fast i rammen.


Hængsler til aluramme kan åbnes 110 grader og er certificeret af LGA. Hængsel er justerbart og kan forsynes med soft-closing funktion.

Laminatfronter er udført 21 mm bestående af 0,8 mm højtrykslaminatbelagt plade på 2 sider og forsynet med 2 mm ABS kantliste på alle kanter.


Laminatfront med glas er lavet med en 60 mm profil. Glasset er et 4 mm hærdet sikkerhedsglas

Hængsler til laminet ramme kan åbnes 270 grader og er certificeret i hen hold til ANSI klasse 1 og EN 15570. Hængslet består af 2 dele, en "kop" der monteres i fronten og beslag som monteres på skabskorpus. Hængslet kan enkelt samles og adskilles i disse 2 komponenter.


Cabinet with laminate glass door
Skab med Laminat glas låge

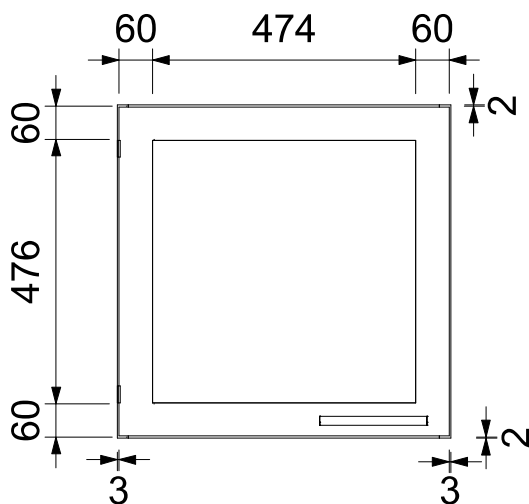

Cabinet with aluminum glass door
Skab med aluminium glas låge

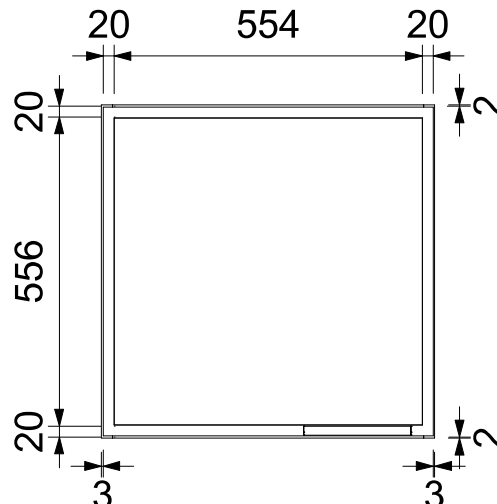

Cabinet with laminate solid door
Skab med Laminat massive låge

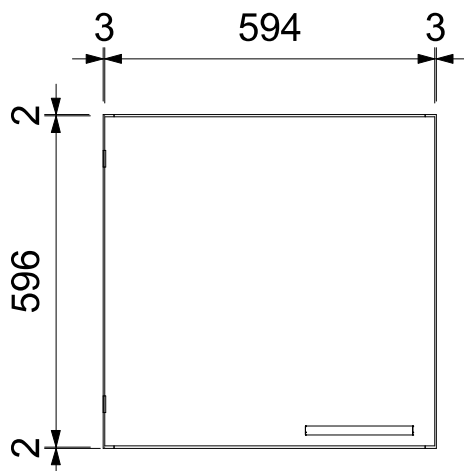

Chemical and Toxic cabinets

Kemikalie- og giftskabe



Chemical Cabinet General Description

Kemikalieskabe, generel beskrivelse

Cabinet carcasses are made of 19 mm white melamine-coated plate (DIN 68765), assembled with glue and dowels. Backplate made of 8 mm white melamine coated plate. The carcass parts are provided with edge strips in PP on all sides and with a dusting profile on the front edges. The carcass is drilled for shelf support with a distance of 32 mm. The plinths are made of 18 mm plywood in height 100 mm with laminate in the dark gray F-2297 Terril.

Fronts and drawer panels are made 21 mm consisting of 0.8 mm high-pressure laminate coated sheet on 2 sides and fitted with 3 mm ABS edge strip on all sides.

Alu front with glass: Fronts with glass made as a frame door with aluminum profile 20.6 x 19mm. The glass is 4mm tempered safety glass mounted with a thin rubber profile in the aluminum groove so that the glass is firmly / stably fixed in the frame.

Shelves made of 16 mm Soft white melamine shelves (DIN 68765), with 1 mm edge band on sides and 3 mm edge band on the front and back edge. The shelves are removable every 32 mm. Can be supplied with 2 mm loose replaceable glass plate for protection against chemicals.

The pull-out is with an integrated damping silent system. It can be fitted with holders for removable baskets. The surface is powder-coated.

Grass drawer with built-in synchronous steering of the drawer with soft closure. Bottom and backplate made with 16 mm Soft white melamine coated plates (DIN 68765) and provided with edge strips in PP on all sides. Each drawer can be loaded with up to 30 kg. Drawer runs should not normally be lubricated.

Thread basket with railing for hanging in the support frame. Made of chrome-plated steel or powder-coated surface.

Hinges for laminate doors can be opened 270 degrees and are certified according to ANSI class 1 and EN 15570. The hinge consists of 2 parts, a "cup" that is mounted in the front and fittings that are mounted on the cabinet carcass. The hinges can easily be assembled and separated into these 2 components.

Hinges for an aluminum frame can be opened 110 degrees and are certified by LGA. The hinge is adjustable and can be provided with a soft-closing function.

Skabskorpor er fremstillet af 19 mm hvide melaminbelagte plader (DIN 68765), samlet med lim og dybler. Bagplade udført i 8 mm hvid melaminbelagt plade. Korpusdelene er forsynet med kantlister i PP på alle kanter og med støvtætningsprofil på forkanter. Korpus er anboret for hyldebærere med en afstand på 32 mm. Soklerne udført i 18 mm krydsfiner i højde 100 mm med laminat i farven mørkegrå F- 2297 Terril.

Fronter og skuffeforstykker er udført i 21 mm plade med 0.8 mm højtrykslaminat på 2 sider og forsynet med 3 mm ABS kantliste på alle kanter.

Alu front med glas: Fronter med glas udføres som rammelåge med aluminium profil 20,6 x 19mm. Glas er 4 mm hærdet sikkerhedsglas monteret med en tynd gummiprofil i alu-notsporet således at glasset sidder godt/stabilt fast i rammen.

Hylde udført i 16 mm Soft hvid melamin hylde (DIN 68765), med 1 mm kantbånd på sider og 3 mm kantbånd på for- og bagkant. Hyldeerne er flytbare for hver 32 mm og kan forsynes med 2 mm løs udskiftelig glasplade for beskyttelse mod kemikalier.

Udtræk med integreret dæmpning silent system. Monteret med holdere for flytbare kurve. Overflade udført pulverlakeret.


Grass skuffe med indbygget INDAMATIC soft lukning. Bund og bagstykke udført i 16 mm Soft hvid melaminbelagt plade (DIN 68765) og forsynet med kantlister i PP på alle kanter. Hver skuffe kan belastes med op til 30 kg. Skuffeløb skal normalt ikke smøres.

Trådkurve med ræling for ophængning i bæreramme. Udført i forkromet stål eller med pulverlakeret overflade.

Hængsler til laminatlåger kan åbnes 270 grader og er certificeret i hen hold til ANSI klasse 1 og EN 15570. Hængslet består af 2 dele, en "kop" der monteres i fronten og beslag som monteres på skabskorpor. Hængslet kan enkelt samles og adskilles i disse 2 komponenter.

Hængsler til aluramme kan åbnes 110 grader og er certificeret af LGA. Hængsel er justerbart og kan forsynes med soft-closing funktion.

Exhaust Valve / Udsugningsventil

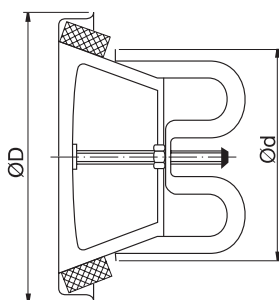

Ød nom	ØD [mm]	m [kg]
100	130	0,30
125	160	0,39
150	188	0,52
160	190	0,52
200	235	0,78

Description

Valve for exhaust air.
Designed for wall or ceiling mounting.
Bayonet holders connect to socket VRGU, VRGL, or VRGM.

Beskrivelse

Ventil til udsugning
Designet til montering i væg eller loft
KSU ventilen monteres direkte i Lindab-rør ved hjælp af ventilrammerne VGU, VRGL eller VRGM

Materials and finish

Material
Coated galvanized sheet metal.
Colour
White RAL 9003, gloss 30 or white RAL 9010 gloss30.

Materialer og finish

Materialer
Lakeret, galvaniseret stålplade
Farve
Hvid RAL 9003, glans 30, som modsvarer NCS S 0502 Y.

Tall storage cabinets

Højskabe



Tall Cabinets General Description

Højskabe, generel beskrivelse

Cabinet carcasses are made of 19 mm white melamine-coated plate (DIN 68765), assembled with glue and dowels. Backplate made of 8 mm white melamine coated plate. The carcass parts are provided with edge strips in PP on all sides and with a dusting profile on the front edges. The carcass is drilled for shelf support with a distance of 32 mm. The plinths are made of 18 mm plywood in height 100 mm with laminate in the dark gray F-2297 Terril.

Fronter and drawer panels are made 21 mm consisting of 0.8 mm high-pressure laminate coated sheet on 2 sides and fitted with 3 mm ABS edge strip on all sides.

Alu front with glass: Fronter with glass made as a frame door with aluminum profile 20,6 x 19mm. The glass is 4mm tempered safety glass mounted with a thin rubber profile in the aluminum groove so that the glass is firmly / stably fixed in the frame.

Shelves made of 16 mm Soft white melamine shelves (DIN 68765), with 1 mm edge band on sides and 3 mm edge band on the front and back edge. The shelves are removable every 32 mm. Can be supplied with 2 mm loose replaceable glass plate for protection against chemicals.

Grass drawer with built-in synchronous steering of the drawer with soft closure. Bottom and backplate made with 16 mm Soft white melamine coated plates (DIN 68765) and provided with edge strips in PP on all sides. Each drawer can be loaded with up to 30 kg. Drawer runs should not normally be lubricated.

Hinges for laminate doors can be opened 270 degrees and are certified according to ANSI class 1 and EN 15570. The hinge consists of 2 parts, a "cup" that is mounted in the front and fittings that are mounted on the cabinet carcass. The hinges can easily be assembled and separated into these 2 components.

Hinges for an aluminum frame can be opened 110 degrees and are certified by LGA. The hinge is adjustable and can be provided with a soft-closing function.

Skabskorpas er fremstillet af 19 mm hvid melaminbelagte plader (DIN 68765), samlet med lim og dybler. Bagplade udført i 8 mm hvid melaminbelagt plade. Korpusedelene er forsynet med kantlister i PP på alle kanter og med støvtætningsprofil på forkanter. Korpas er anført for hyldebærere med en afstand på 32 mm. Soklerne udført i 18 mm krydsfiner i højde 100 mm med laminat i farven mørkegrå F- 2297 Terril.

Fronter og skuffeforstykker er 21 mm tykke og består af 0,8 mm højtrykslaminatbelagt plade på 2 sider og er forsynet med 3 mm ABS kantliste på alle kanter.

Alu front med glas: Fronter med glas udføres som rammelåge med aluminium profil 20,6 x 19mm. Glas er 4mm hærdet sikkerhedsglas monteret med en tynd gummiprofil i alu-notsporet, således at glasset sidder godt/stabilt fast i rammen.

Hylde udført 16 mm Soft hvid melamin hylde (DIN 68765), med 1 mm kantbånd på sider og 3 mm kantbånd på for- og bagkant. Hyldeerne er flytbare for hver 32 mm. Kan forsynes med 2 mm løs udskiftelig glasplade for beskyttelse mod kemikalier.

Grass skuffe med indbygget INDAMATIC soft lukning. Bund og bagstykke udført med 16 mm Soft hvid melaminbelagt plade (DIN 68765) og forsynet med kantlister i PP på alle kanter. Hver skuffe kan belastes med op til 30 kg. Skuffeløb skal normalt ikke smøres.


Hængsler til laminatdøre kan åbnes 270 grader og er certificeret i henhold til ANSI klasse 1 og EN 15570. Hængslet består af 2 dele, en "kop" der monteres i fronten og beslag som monteres på skabskorpas. Hængslet kan enkelt samles og adskilles i disse 2 komponenter.

Hængsler til aluramme kan åbnes 110 grader og er certificeret af LGA. Hængsel er justerbart og kan forsynes med soft-closing funktion.

Hinges for laminate doors
Hængsler til laminatlåger



Opening 270°
Åbning 270°

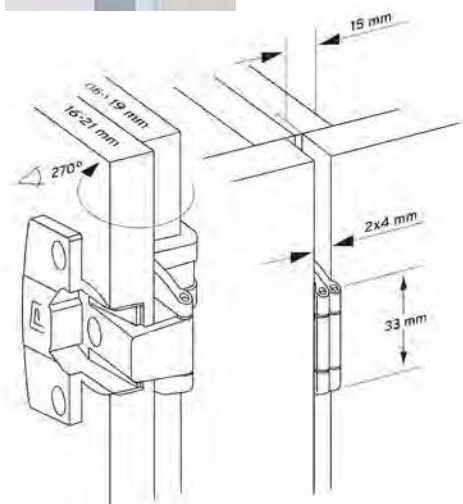

Hinges for Alu doors
Hængsler til alulåger



Opening 110°
Åbning 110°

System cabinet with ABS sides

Systemskab med ABS sider



System Cabinet General Description

Cabinet carcasses are made of 19 mm white melamine-coated plate (DIN 68765), assembled with glue and dowels. Backplate made of 8 mm white melamine coated plate. The carcass parts are provided with edge strips in PP on all sides and with a dusting profile on the front edges. The carcass is drilled for shelf support with a distance of 32 mm. The plinths are made of 18 mm plywood in height 100 mm with laminate in the dark gray F-2297 Terril.

Fronts and drawer panels are made 21 mm consisting of 0.8 mm high-pressure laminate coated sheet on 2 sides and fitted with 3 mm ABS edge strip on all sides.

Alu front with glass: Fronts with glass made as a frame door with aluminum profile 20,6 x 19mm. The glass is 4mm tempered safety glass mounted with a thin rubber profile in the aluminum groove so that the glass is firmly / stably fixed in the frame.

ABS sides: ABS matt gloss surface.

Temperature range: from -30 ° C to +95 ° C.

Chemical resistance: good resistance to petrol, bases and lubricants, conditionally resistant to acids and alcohol.

Straight insert and with locked tilt function pull-out tray / basket.

Hinges for laminate doors can be opened 270 degrees and are certified according to ANSI class 1 and EN 15570. The hinge consists of 2 parts, a "cup" that is mounted in the front and fittings that are mounted on the cabinet carcass. The hinges can easily be assembled and separated into these 2 components.

Hinges for an aluminum frame can be opened 110 degrees and are certified by LGA. The hinge is adjustable and can be provided with a soft-closing function.

Systemkabe, generel beskrivelse

Skabskorpus er fremstillet af 19 mm hvide melaminbelagte plader (DIN 68765), samlet med lim og dybler. Bagplade udført i 8 mm hvid melaminbelagt plade. Korpusdelene er forsynet med kantlister i PP på alle kanter og med støvtætningsprofil på forkanter. Korpus er anført for hyldebærere med en afstand på 32 mm. Soklerne udført i 18 mm krydsfiner i højde 100 mm med laminat i farven mørkegrå F-2297 Terril.

Fronter og skuffeforstykker er udført 21 mm bestående af 0,8 mm højtrykslaminatbelagt plade på 2 sider og forsynet med 3 mm ABS kantliste på alle kanter.

Alu front med glas: Fronter med glas udføres som rammeløse med aluminium profil 20,6 x 19mm. Glas er 4mm hærdet sikkerhedsglas monteret med en tynd gummiprofil i alu-notsporet således at glasset sidder godt/stabilt fast i rammen.

ABS sider: ABS mat-gloss overflade.

Temperaturområde: fra -30 ° C til +95 ° C.

Kemisk resistens: god resistens over for benzin, baser og smøremidler, betinget modstandsdygtig over for syrer og alkohol.

Lige indstik og med låst tilt funktion udtræksbakke / kurve.


Hængsler til laminatdøre kan åbnes 270 grader og er certificeret i hen hold til ANSI klasse 1 og EN 15570. Hængslet består af 2 dele, en "kop" der monteres i fronten og beslag som monteres på skabskorpus. Hængslet kan enkelt samles og adskilles i disse 2 komponenter.

Hængsler til aluramme kan åbnes 110 grader og er certificeret af LGA. Hængsel er justerbart og kan forsynes med soft-closing funktion.

Hinges for laminate doors
Hængsler til laminatlåger



Opening 270°
Åbning 270°

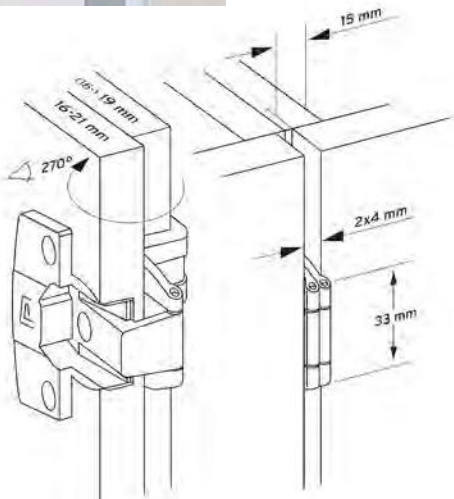

Hinges for Alu doors
Hængsler til ALU låger



Opening 110°
Åbning 110°


Plinth placement illustration / Illustration af sokkelplacering

Plinths are made of a waterproof sheet with 0.9 mm HPL high-pressure laminate on both sides. Plinths are supplied as an individual plinth for each module or as a common plinth for entire furniture installations.


The module plinths are delivered assembled and the common plinths for entire furniture installations are delivered unassembled.

Sokler er fremstillet i vandfast plade pålagt 0.9 mm HPL højtrykslaminat på begge sider. Sokler leveres som individuel sokkel til hvert modul eller som fælles sokkel til hele inventaropstillinger.

Modulsoklerne leveres samlede og fællessoklerne usamlede.

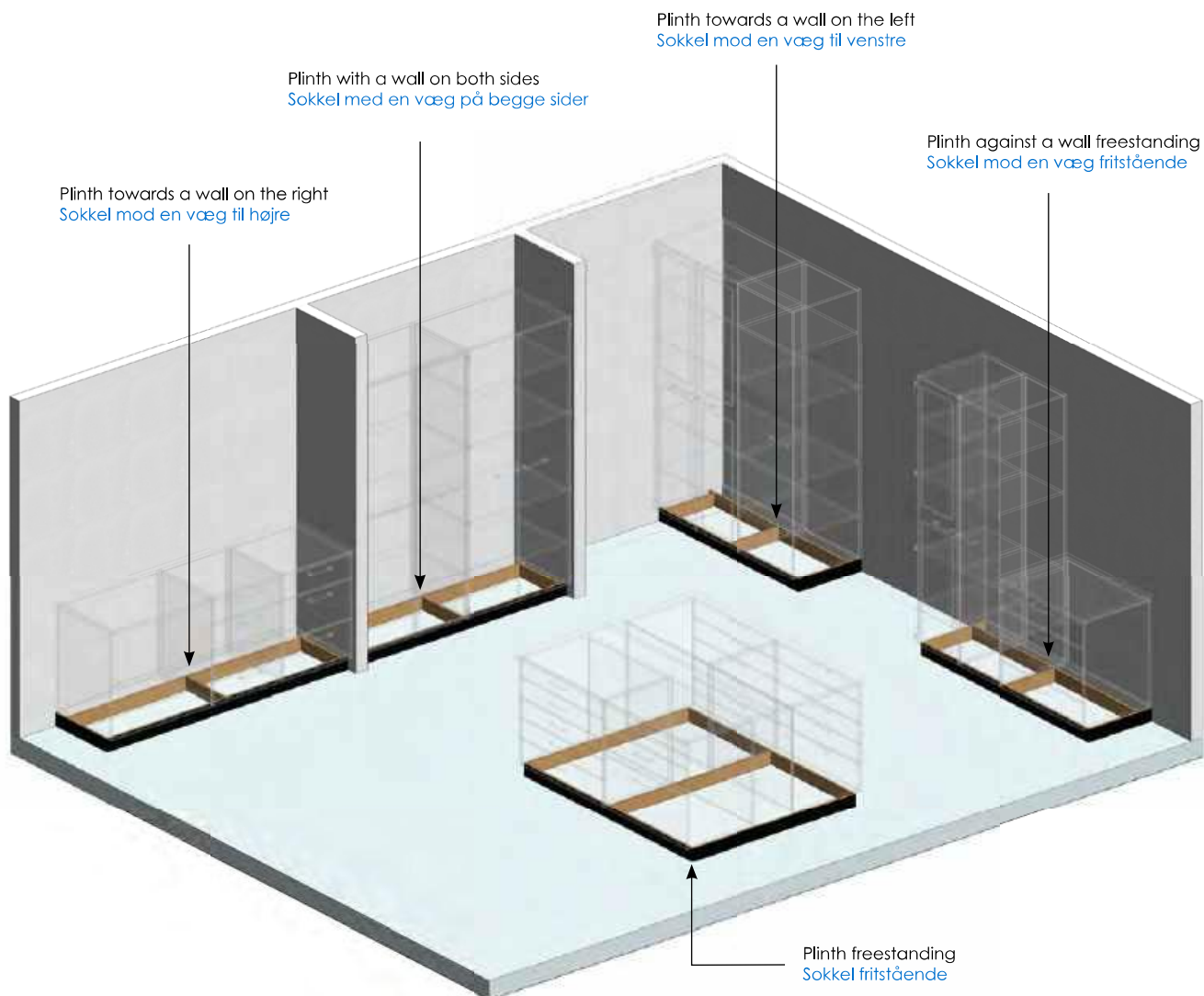

Plinth placement under a cabinet Sokkelplacering under et skab

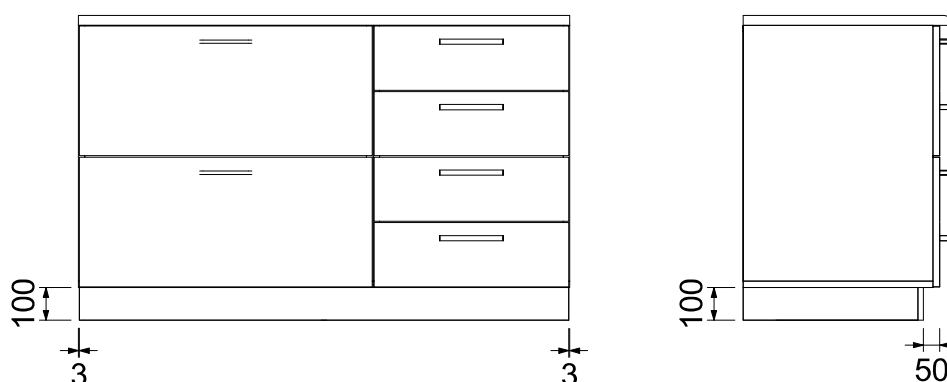

Trays and Baskets

Bakker og kurve



Trays and Basket options / Optioner for bakker og kurve

Baskets and trays is available in three different materials
Bakker kan fås i tre forskellige materialer

- ◆ ABS plastic (gray) / ABS plast (grå)
- ◆ PC plastic (transparent) / PC plast (gennemsigtig)
- ◆ Wire basket (plastic coated steel) / Trådkurv (plastrovertrukket stål)

Trays and baskets with fixed pull-out.
Bakker og kurve med endestop og fikseret udtræk.

- ◆ Can be placed both horizontally and sloped for an easy overview of items stored. / Kan stilles både vandret og skråstillet for enkel adgang og overskuelighed øverst i skabet.

Trays and baskets can be fitted with an 110% pull-out bearing that withstands storage up to 50 kg.

Bakker og kurve kan monteres med 110% udtræk som kan tåle stor vægt 50 kg

- ◆ Ability for removable rails for the absolute flexible layout of the closet. / Mulighed for flytbare skinner for den absolutte fleksible indretning af skabet.



Trays and baskets with pull-out can carry 20 kg to 50 kg
Bakker og kurve med udtræk kan bære fra 20 kg til 50 kg

- ◆ Smooth surfaces for optimum hygiene / Glatte overflader for optimal hygiejne
- ◆ Simple installation of dividers (ClipOn effect) / Enkel montering af inddelere (ClipOn effekt)
- ◆ Possibility labeling, example with company logo / Mulighed for mærkning, for eksempel med firmaplogo
- ◆ Low weight / Lav vægt
- ◆ Stackable / Kan stables



Trays and baskets properties / Egenskaber for bakker og kurve

FlexModul® ISO formats stands for modular flexibility and high quality for absolute tidy storage in cabinet modules

FlexModul® ISO-formater står for modulær fleksibilitet og høj kvalitet for absolut ryddelig opbevaring i skabsmoduler

Trays and baskets can of course be provided with end stops for fixed extraction.

Bakker og kurve kan selvfølgelig forsynes med endestop til fikseret udtræk.

Materials Materialer



ABS Grey
ABS Grå



PC transparent
PC transparent



Wire basket, Coated
Trådkurv, Coated

Compartment Ruminddeling



Fixed dividers
Faste ruminddelere



Variable compartments
Variable ruminddelinger



Removable dividers for quick cleaning
Flytbare ruminddelere for hurtig rengøring

Heights Højder



50 mm



100 mm



200 mm

Sizes Størrelser



DIN-modul 600 x 400 mm
DIN-modul 600 x 400 mm



Half DIN-modul 300 x 400 mm
Halvt DIN-modul 300 x 400 mm

Flex Module trays - ABS, ISO and PC
FlexModul bakker - ABS, ISO og PC

Tray ABS ISO
Bakke ABS ISO



Width Bredde (mm)	Depth Dybde (mm)	Height Højde (mm)	Item nr. Varenr.	Material Materiale
-------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------

600	400	50	7011050	ABS grey/ABS grå
-----	-----	----	---------	------------------

Tray ABS ISO open
Bakke ABS ISO open



600	400	100	7012100	ABS grey/ABS grå
-----	-----	-----	---------	------------------

Tray ABS ISO open
Bakke ABS ISO open



600	400	200	7012200	ABS grey/ABS grå
-----	-----	-----	---------	------------------

Flex Module Tray PC ISO open
FlexModul bakke PC ISO åben

Tray PC ISO
Bakke PC ISO



Width Bredde (mm)	Depth Dybde (mm)	Height Højde (mm)	Item nr. Varenr.	Material Materiale
-------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------

600	400	50	7021050	PC transparent
-----	-----	----	---------	----------------

Tray PC ISO open
Bakke PC ISO open




600	400	100	7022100	PC transparent
-----	-----	-----	---------	----------------

Tray PC ISO open
Bakke PC ISO open



600	400	200	7022200	PC transparent
-----	-----	-----	---------	----------------

Flex Module Tray ISO closed
FlexModulbakke ISO lukket
Width
Bredde
(mm)
Depth
Dybde
(mm)
Height
Højde
(mm)
Item nr.
Varenr.
Material
Materiale

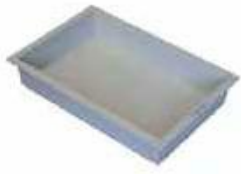 Tray ABS ISO closed
 Bakke ABS ISO lukket


600

400

100

7011100

ABS grey/ABS grå

 Tray ABS ISO closed
 Bakke ABS ISO lukket


600

400

200

7011200

ABS grey/ABS grå

Wired baskets
Trådkurve
Width
Bredde
(mm)
Depth
Dybde
(mm)
Height
Højde
(mm)
Item nr.
Varenr.
Material
Materiale

 Wired basket ISO
 Trådkurve ISO


600

400

100

7602100

Steel wire/Ståltråd

 Wired basket ISO
 Trådkurve ISO



600

400

180

7602180

Steel wire/Ståltråd

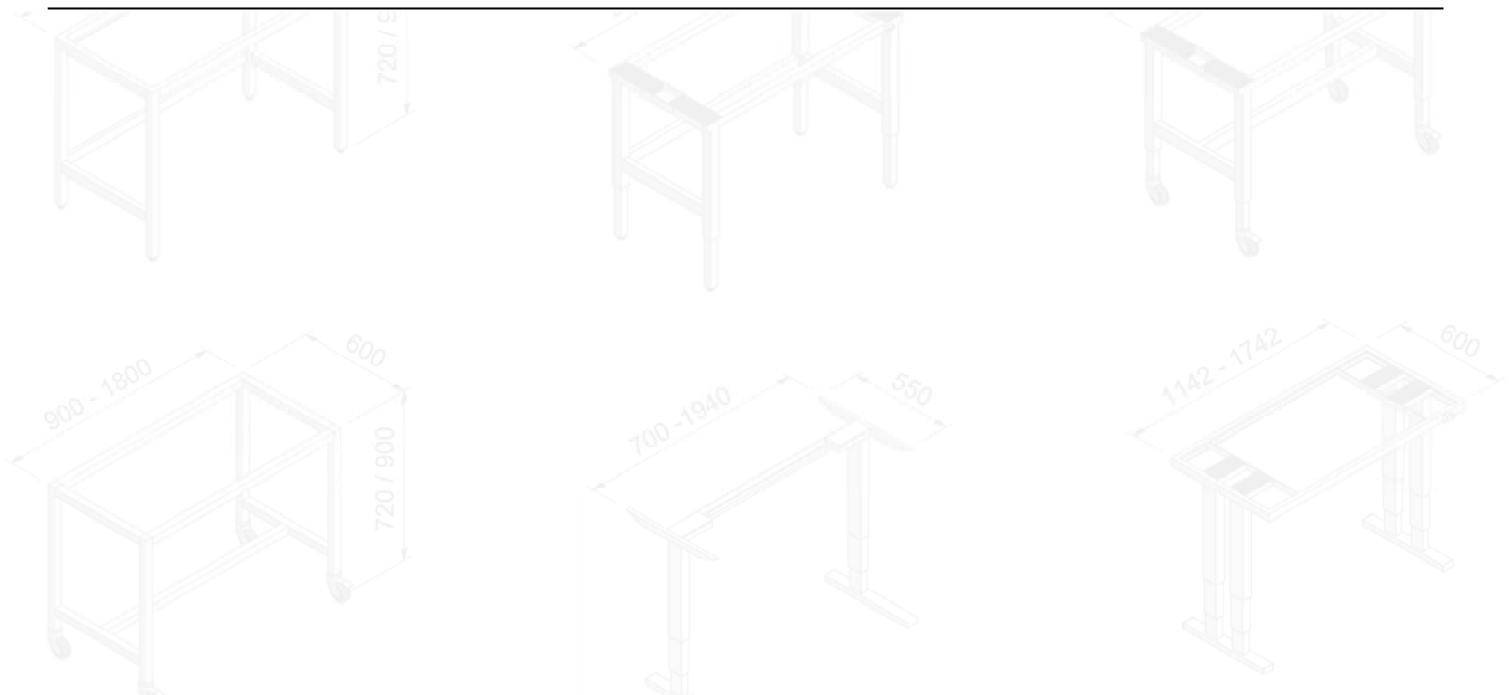

Dividing system - ISO, ABS and PC
Skillekummersystem - ISO, ABS og PC
Width
Bredde
(mm)
Height
Højde
(mm)
Item nr.
Varenr.
Material
Materiale

 Tray divider ABS with clip-on effect
 Bakkeskillekummersystem ABS med clip-on effekt


400

50

7810105

ABS grey/ABS grå

 Tray divider ABS with clip-on effect
 Bakkeskillekummersystem ABS med clip-on effekt


600

50

7810104

ABS grey/ABS grå

 Tray divider ABS with clip-on effect
 Bakkeskillekummersystem ABS med clip-on effekt


400

100

7811205N

ABS grey/ABS grå

 Tray divider ABS with clip-on effect
 Bakkeskillekummersystem ABS med clip-on effekt


600

100

7811204N

ABS grey/ABS grå

 Tray divider ABS with clip-on effect
 Bakkeskillekummersystem ABS med clip-on effekt


400

200

7811305

ABS grey/ABS grå

 Tray divider ABS with clip-on effect
 Bakkeskillekummersystem ABS med clip-on effekt


600

200

7811304

ABS grey/ABS grå

Dividing system ISO PC Skillerumssystem ISO PC		Width Bredde (mm)	Height Højde (mm)	Item nr. Varenr.	Material Materiale
Tray divider PC with clip-on effect Bakkeskillerum PC med clip-on effekt		400	50	7810102	PC transparent
Tray divider PC with clip-on effect Bakkeskillerum PC med clip-on effekt		600	50	7810101	PC transparent
Tray divider PC with clip-on effect Bakkeskillerum PC med clip-on effekt		400	100	7811202N	PC
Tray divider PC with clip-on effect Bakkeskillerum PC med clip-on effekt		600	100	7811201N	PC
Tray divider PC with clip-on effect Bakkeskillerum PC med clip-on effekt		400	200	7811302	PC
Tray divider PC with clip-on effect Bakkeskillerum PC med clip-on effekt		600	200	7811301	PC

Wired Dividing system ISO
Trådskillerumssystem ISO

Width Bredde (mm)	Height Højde (mm)	Item nr. Varenr.	Material Materiale
-------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------

Wired divider ISO
Trådskillerum ISO



400	100	7950011	Steel wire/Ståltråd
-----	-----	---------	---------------------

Wired divider ISO
Trådskillerum ISO




600	100	7950012	Steel wire/Ståltråd
-----	-----	---------	---------------------

Wired divider ISO
Trådskillerum ISO




400	180	7950014	Steel wire/Ståltråd
-----	-----	---------	---------------------

Wired divider ISO
Trådskillerum ISO

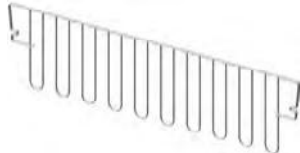

600	180	7950015	Steel wire/Ståltråd
-----	-----	---------	---------------------

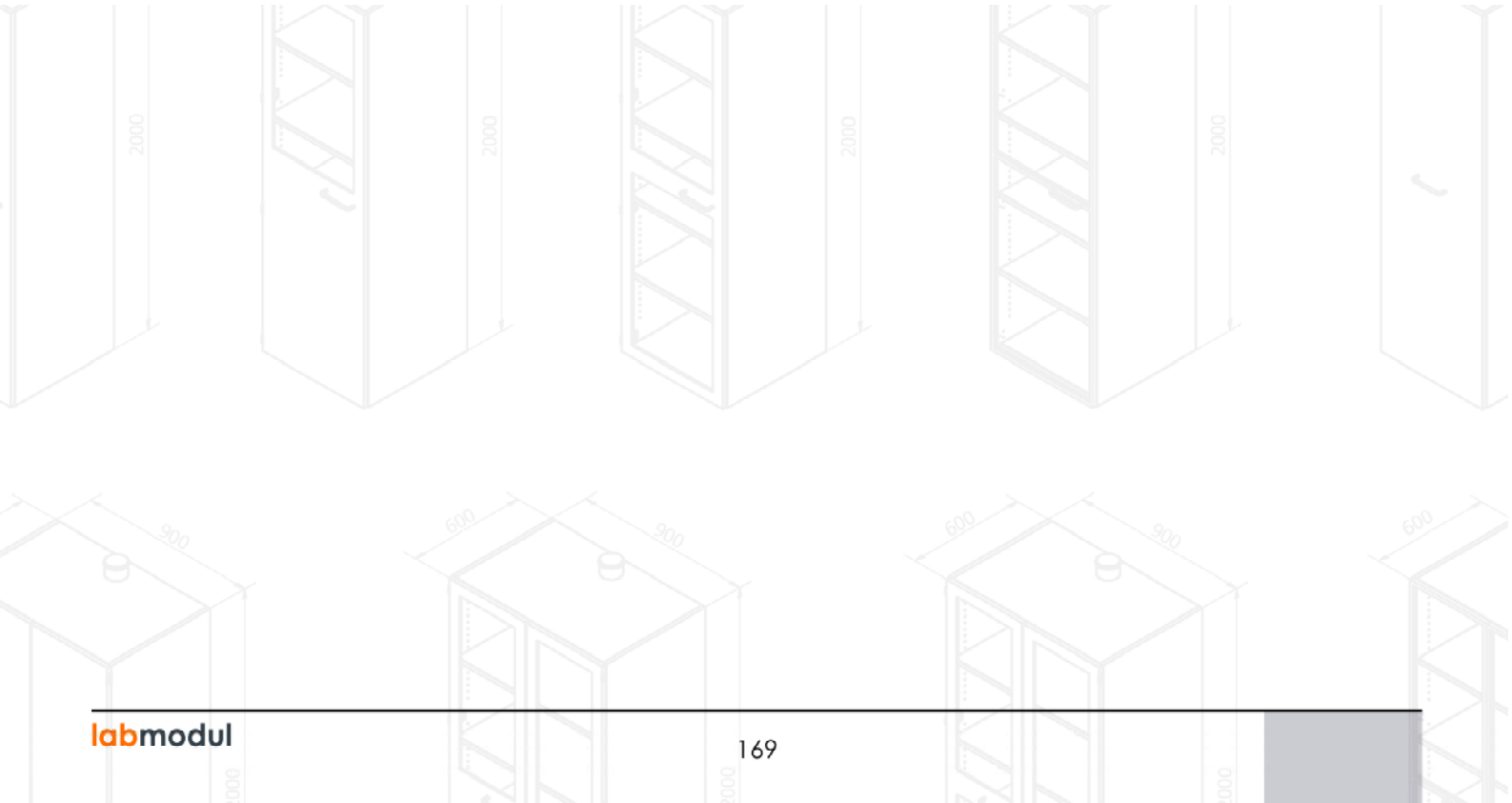

Extraction arm

Punktsugarm



Extraction arm Overview / Punktsugearm oversigt

Standard suction arms in aluminum (AL) are suitable in work areas where there are no special requirements for chemical resistance or conductive properties. The pipes are made of anodised aluminum and the joints are molded in shockproof polypropylene (PP). The suction arms can be supplied with suction tips or suction screens in several materials.

Standard sugearme i aluminium (AL) er velegnede i arbejdsområder, hvor der ikke er særlige krav til kemisk resistens eller konduktive egenskaber. Rørene er udført i eloxeret aluminium og leddene er støbt i stødsikker polypropylen (PP). Sugearmene kan leveres med sugespids eller sugeskærme i flere materialer.

Extraction arm models


Punktsugearm modeller



Table mounted
Bordmonteret



Cabinets mounted
Skabsmonteret

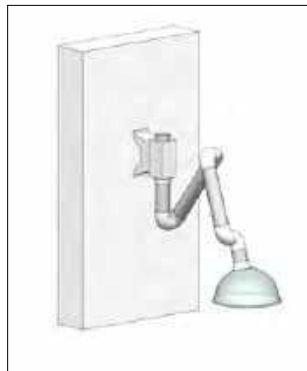


Wall mounted
Vægmonteret



Ceiling mounted
Løftmonteret


Suction Pens and Hoods

Skærme og sugespids

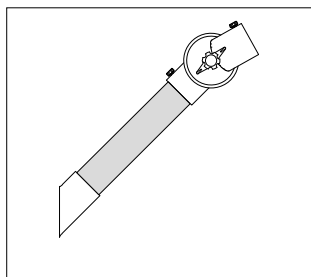


Suction tip recommended for small concentrated sources of contamination. High efficiency, as the suction tip can be placed very close to the source of contamination without obstructing the work process. Suction tip in anodised aluminum surface 10 µ. suction tip opening is designed in a way that it increases suction power. Length: 210 mm

Sugespids anbefalet til små koncentrerede forureningskilder. Stor effektivitet, da sugespidsen kan placeres helt tæt på forureningskilden uden at hindre arbejdsprocessen. Sugespids i eloxeret aluminium overflade 10 µ. Udtaget åbning, der øger sugeevnen
Længde: 210 mm

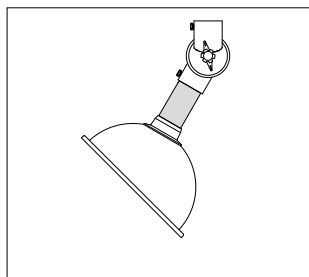

Round hood recommended for light fumes, gases and over small open vessels. Diameter of hood: Ø280 mm. Increased stability when moving the hood due to the reinforced rim of the hood. Hood made of transparent PETG, resistant to solvents. Tube connection made of anodised aluminum - surface 10 µ. The transparent screen provides a clear view of the work process.

Rund skærm anbefalet til udsugning af lette dampe og gasser samt over små åbne kar. Diameter: Ø280 mm. En forstærket kant på skærmen øger stabiliteten. Øget effektivitet ved lodret eller vinklet placering af skærmen. Skærm i transparent PETG, der er modstands-dygtig over for opløsningsmidler. Rørstuds i eloxeret aluminium - overflade 10 µ. Den gennemsigtige skærm giver frit udsyn til arbejdsprocessen.

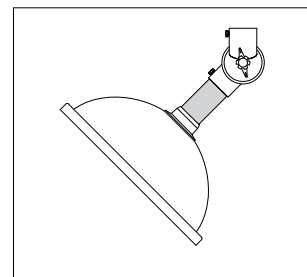

Round screen recommended for extraction of light fumes and gases as well as over small open vessels. Diameter: Ø385 mm. A reinforced edge on the screen increases stability. Increased efficiency with vertical or angled placement of the screen. The screen in transparent PETG, which is resistant to solvents. Tube connection made of anodised aluminum - surface 10 µ. The transparent screen provides a clear view of the work process.


Rund skærm anbefalet til udsugning af lette dampe og gasser samt over små åbne kar. Diameter: Ø385 mm. En forstærket kant på skærmen øger stabiliteten. Øget effektivitet ved lodret eller vinklet placering af skærmen. Skærm i transparent PETG, der er modstands-dygtig over for opløsningsmidler. Rørstuds i alukseret aluminium - overflade 10 µ. Den gennemsigtige skærm giver frit udsyn til arbejdsprocessen.

Extraction arm Range / work areas

Punktsugearm rækkevidde / arbejdsområder

The working area of the arm is defined from the center of the suction opening. There may therefore be changes in relation to the selected screen and its positioning. When choosing an arm, we recommend that the stationary working position of the arm is not placed in the very bottom or very upper part of the work area. Contact Labmodul for further information

Armens arbejdsområde er defineret ud fra center af sugeåbningen. Der kan derfor forekomme ændringer i forhold til valgte skærm samt positionering af denne. Ved valg af arm anbefaler vi, at armens stationære arbejdsposition ikke placeres i den allernederste eller allerøverste del af arbejdsområdet. Kontakt Labmodul for yderligere information

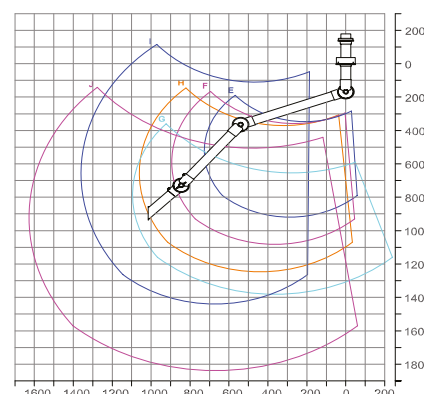

System 75 / System 75

System 75

Air volume: 80-180 m³ / h. System 75 is applicable in many different industries such as Laboratories, laser technology, chemical, pharmaceutical and food industries, universities and machine shops. In addition it is also applicable in hairdressing salons, veterinary hospitals and the electronics industry.

System 75

Luftmængde: 80-180 m³/h. System 75 finder anvendelse i mange forskellige brancher som f.eks. laboratorier, laserteknik, kemisk, medicinal- og levnedsmiddelindustri, skoler, gymnasier, universiteter og maskinværksteder.

**System 75 Telescopic**

System 75 Telescopic is particularly applicable for stationary workstations such as extraction from vessels or at weighing stations. The system is made of aluminum pipes and is therefore applicable in work areas with no special chemical resistance or conductivity requirements.

System 75 Teleskopisk

System 75 Teleskopisk egner sig særligt til brug ved stationære arbejdsstationer som f.eks. ved udsugning fra kar eller ved vejestationer. Systemet består bl.a. af aluminiumsrør og finder derfor anvendelse i arbejdsområder, hvor der ikke er særlige krav til kemisk resistens eller konduktivitet.

System 75 extraction arm - Ø75 mm / System 75 Sugearme - Ø75 mm

Assembly form Numbers 3-joints Montageform Antal led 3	Range/Length Rækkevidde (mm)	Airflow m ³ /time / Luftmængde m ³ /time			Article No. Artikel nr.
		Minimum Minimum	Normal Normal	Maximum Maksimum	
Table mounted Bordmontage	830	80 m ³	140 m ³	180 m ³	75-3535-1-5
	1105				75-5545-1-5
	1290				75-6555-1-5
	1620				75-9065-1-5
Cabinets mounted Wall mounted Ceiling mounted Skabsmontage Vægmontage Loftmontage	795	80 m ³	140 m ³	180 m ³	75-3535-3-5
	1200				75-3590-3-5
	1060				75-5545-3-5
	1230				75-6555-3-5
	1550				75-9065-3-5
	1660				75-9065-3-22-5 ¹⁾
	1730				75-9090-3-5
	1990				75-9090-3-22-5 ²⁾

1) With one external gas spring. 2) With two external gas springs

1) Med én udvendig gasdæmper. 2) Med to udvendige gasdæmpere

System 75 TELESCOPIC Hoods - Ø75 mm / System 75 TELESKOP sugearme - Ø75 mm

Assembly form Montageform	Range/Length Rækkevidde (mm)	Airflow m ³ /time / Luftmængde m ³ /time			Article No. Artikel nr.
		Minimum Minimum	Normal Normal	Maximum Maksimum	
Wall mounted Vægmontage	950-1300	80 m ³	140 m ³	180 m ³	900-1300-2
	1300-1900				900-1900-2
Ceiling mounted Loftmontage	900-1300	80 m ³	140 m ³	180 m ³	900-1300-3
	1300-1900				900-1900-3

Screen / Hood**Dimensions: Ø75**

The selection of hoods covering both chemical-resistant screens and PETG monitors for general use. The screens are included a pipe outlet.

For variants for anti-static and chemical use, contact Labmodul for further information.

Skærme**Rørdiameter: Ø75**

Udvalget af skærme dækker både kemisk resistente skærme og PETG-skærme til almindelig brug. Skærmene er inkl. rørstuds. For varianter til antistatisk og kemisk brug, kontakt Labmodul for yderligere information.

Suction tip and screen - Ø75 mm / Skærme og sugespids - Ø75 mm

Suction tip Sugespids	Length Længde (mm)	Article No. Artikel nr.
	250	1-7525
Screen / Skærme	Diameter (mm)	
	280	1-7528-5
	385	1-7535-5

Optimal location of various screen types / Optimal placering af forskellige skærmtyper

By evaluating the screen lock based on the screen opening, there are basically 3 ways to place the screen. The different locations affect the extraction efficiency, which also depends on the distance to the source of pollution and the airflow.


Therefore, it will always be advisable to place the screen as close to the source of pollution as possible without interfering with the workflow. It will also be advisable to make sure that the damper is fully opened. The control for the built-in damper is located on the right side of the joint.

Ved at vurdere skærmlaceringen ud fra skærmåbningen findes der grundlæggende 3 måder at placere skærmen på. De forskellige placeringer har betydning for udsugningseffektiviteten, som ligeledes afhænger af afstanden til forureningskilden og luftmængden.

Derfor vil det altid være tilrådeligt at placere skærmen så tæt på forureningskilden, som det er muligt uden at forstyrre arbejdsprocessen. Det vil også være tilrådeligt at sikre sig, at spjældet er åbnet helt op. Reguleringen til det indbyggede spjæld sidder på den højre side af leddet.

1. With vertical screen opening, where the screen is placed directly against the table or close.

Med lodret skærmåbning, hvor skærmen placeres direkte mod bordet eller tæt på.

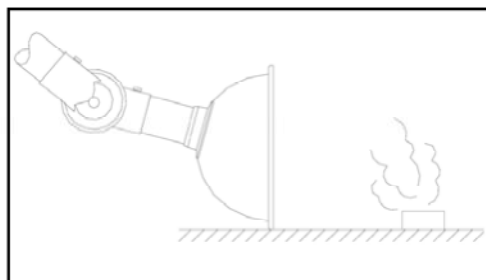


2. With angled screen opening, the screen is placed obliquely behind the source of pollution.

Med vinklet skærmåbning, hvor skærmen placeres skråt bag forureningskilden.

These two ways to place the screen are generally the most effective.

Disse to måder at placere skærmen på er generelt de mest effektive.

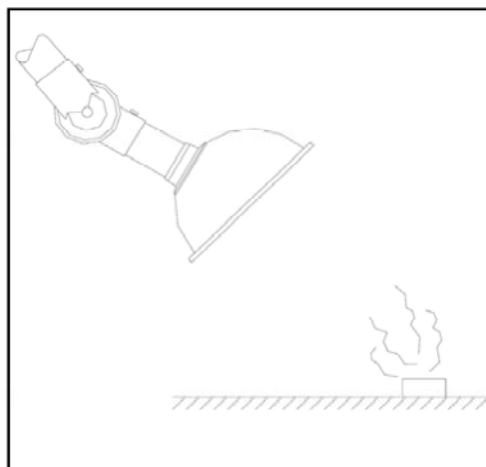


3. With horizontal screen opening, where the screen is placed over and possibly a little behind the source of pollution.

Med vandret skærmåbning, hvor skærmen placeres over og evt. lidt bag forureningskilden.

This way of placing the monitor will usually require the screen to push slightly behind and at the same time raise higher above the source of pollution so as not to bother the workflow. This generally achieves lower efficiency with this location

Denne måde at placere skærmen på vil oftest kræve, at skærmen skubbes lidt hen bag og samtidig hæves højere over forureningskilden for ikke at genere arbejdsprocessen. Derved opnås der generelt en lavere effektivitet med denne placering

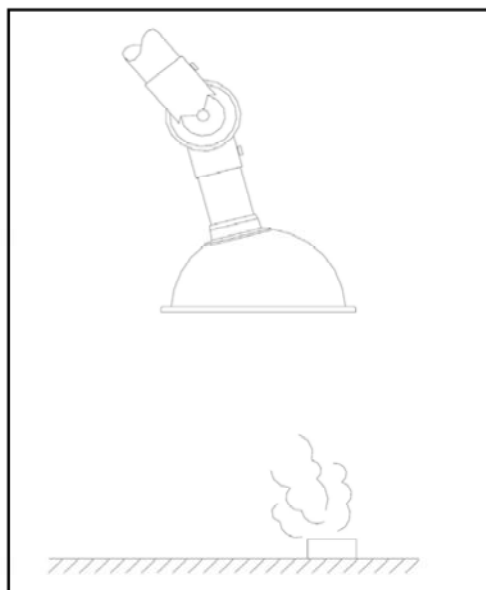

Wall / ceiling extraction arm Væg / loft punktsugearm	Wall/Ceiling 3-joint Væg/loft 3-led	Work range Rækkevidde (mm)	Diameter Diameter	Item nr. Varenr.	Joint color Samleled farve
--	--	----------------------------------	----------------------	---------------------	-------------------------------



Wall mounted
Vægmonteret



Ceiling mounted
Loftmonteret



795	Ø75	ZAL-75-3535-3-5	White/Hvid
1060	Ø75	ZAL-75-3590-3-5	White/Hvid
1230	Ø75	ZAL-75-6555-3-5	White/Hvid
1550	Ø75	ZAL-75-9065-3-5	White/Hvid
1730	Ø75	ZAL-75-9090-3-5	White/Hvid

Extraction bracket for wall and ceiling Punktsugebeslag til væg og loft

Width Bredde (mm)	Depth Dybde (mm)	Height Højde (mm)	Item nr. Varenr.	Color Farve
-------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	----------------

Wall bracket for extraction arm
Vægbeslag til punktsugarm

ITEM	Width	Depth	Height
ZAL-2-195	100	232	196



Ceiling bracket for extraction arm
Loftbeslag til punktsugarm


ITEM	Width	Depth	Height
ZAL-2-500-80	0	0	500
ZAL-2-750-80	0	0	750
ZAL-2-1000-80	0	0	1000
ZAL-2-1250-80	0	0	1250
ZAL-2-1500-80	0	0	1500
ZAL-2-1750-80	0	0	1750
ZAL-2-2000-80	0	0	2000
ZAL-2-2500-80	0	0	2500



Suction head Sugespidser



250mm	1-7525	Powder-coated aluminum Pulverlakeret aluminium
Ø280	1-7528-5	Transparent PETG Transparent PETG
Ø385	1-7535-5	Transparent PETG Transparent PETG

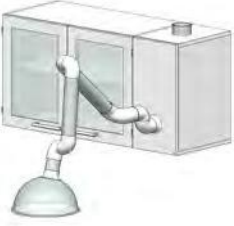Cabinets mounted extraction arm Skabsmonteret punktsugearm	Wall/Ceiling 3-joint Væg/Loft 3-led	Work range Rækkevidde (mm)	Diameter Diameter	Item nr. Varenr.	Joint color Samleled farve
 		795	Ø75	ZAL-75-3535-3-5	White/Hvid
		1060	Ø75	ZAL-75-3590-3-5	White/Hvid
		1230	Ø75	ZAL-75-6555-3-5	White/Hvid
		1550	Ø75	ZAL-75-9065-3-5	White/Hvid
		1730	Ø75	ZAL-75-9090-3-5	White/Hvid

Cabinet flange for front-mounted suction arm Skabsflange til frontmonteret sugearm	Diameter Diameter	Item nr. Varenr.	Color Farve
---	----------------------	---------------------	----------------



Ø75

ZAL-4-75-13-5

White/Hvid

Table mounted extraction arm Bordmonteret punktsugearm	Wall/Ceiling 3-joint Væg/Loft 3-led	Work range Rækkevidde (mm)	Diameter Diameter	Item nr. Varenr.	Joint color Samleled farve
 		830	Ø75	ZAL-75-3535-1-5	White/Hvid
		1105	Ø75	ZAL-75-5545-1-5	White/Hvid
		1290	Ø75	ZAL-75-6555-1-5	White/Hvid
		1620	Ø75	ZAL-75-9065-1-5	White/Hvid

Extraction bracket on table and cabinet Punktsugebeslag på bord og skab	Width Bredde (mm)	Depth Dybde (mm)	Height Højde (mm)	Item nr. Varenr.	Color Farve
--	-------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	----------------

Table bracket with screws
Bordbeslag med skruer


210

140

ZAL-2-7510

White/Hvid



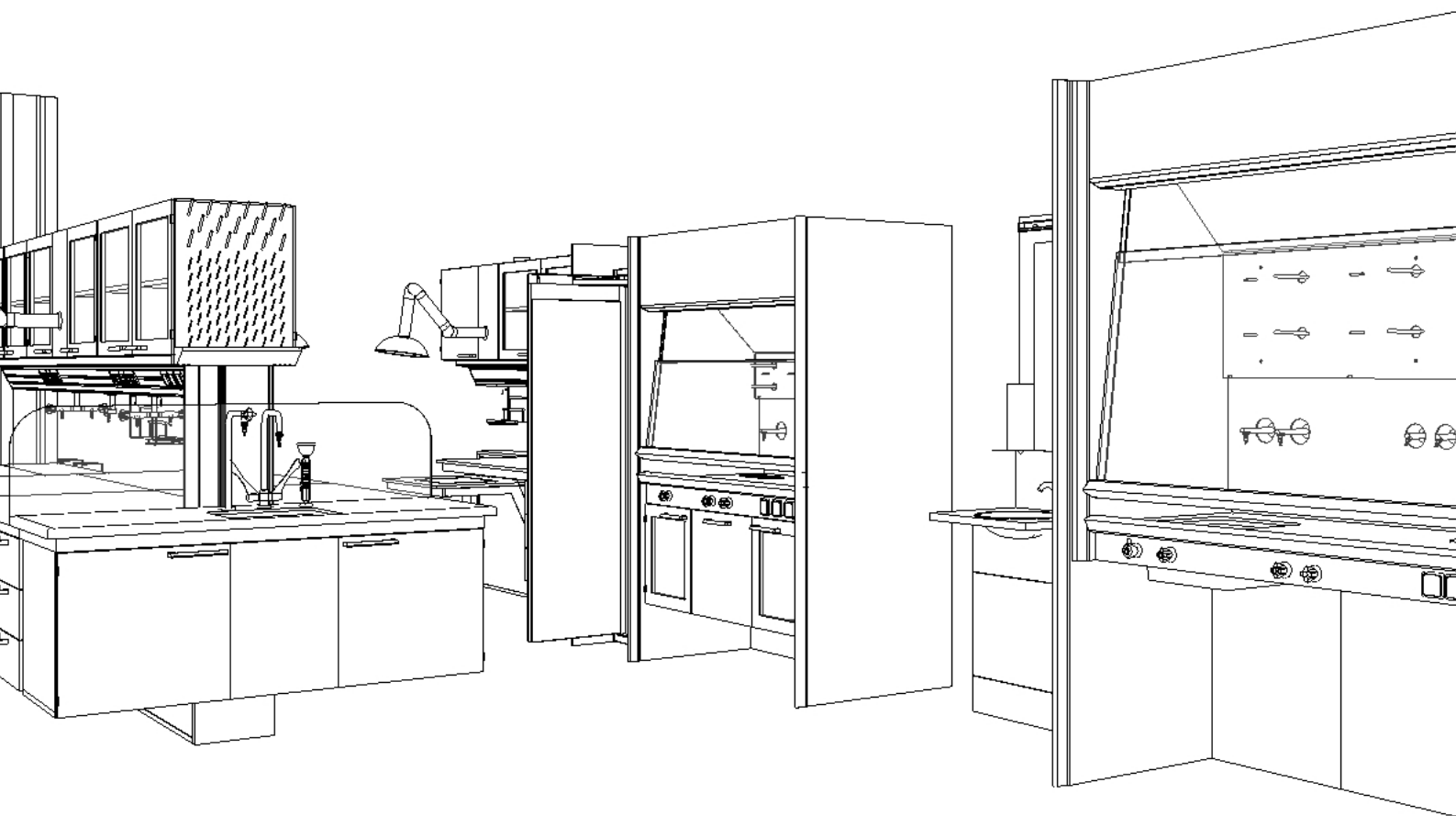

labmodul

